



# Glooko<sup>®</sup> Uploader

Notkunarleiðbeiningar – fyrir notendur Glooko

**glooko**<sup>®</sup>  
BETTER TOGETHER



# Efnisyfirlit

Tæki fundið .....	4-5
-------------------	-----

<b>Almennar upplýsingar.....</b>	<b>6</b>
----------------------------------	----------

Vörulýsing.....	6
Fyrirhuguð notkun.....	6
Studd tæki.....	6
Varnaðarorð.....	6
Frábendingar.....	6

<b>Notkunarleiðbeiningar.....</b>	<b>7</b>
-----------------------------------	----------

Sjúklingar.....	8
Innskráning á MyGlooko-stjórnborðið á <a href="https://my.glooko.com">https://my.glooko.com</a> .....	8
Uppsetningarskrá hugbúnaðarins sótt.....	8
Uppsetningarskrá fundin og skráin keyrð.....	8

Heilbrigðisstarfsfólk.....	9
Óskað eftir tengli til að sækja Glooko Uploader-hugbúnaðinn.....	9
Uppsetningarskrá hugbúnaðarins sótt.....	9
Uppsetningarskrá fundin og skráin keyrð.....	9

Sjúklingar og heilbrigðisstarfsfólk.....	10
Glooko Uploader-hugbúnaðurinn opnaður.....	10
Innskráning á Glooko-reikning.....	10
Eiginleikar Glooko Uploader.....	11
Sykursýkigögnum hlaðið upp.....	12
Sykursýkigögn skoðuð.....	13

<b>Samhæf tæki og sendingaraðferðir.....</b>	<b>14</b>
--	-----------

# Tæki fundið



Blóðsykurmælir










Samfelld

sykurnemamæling (CGM)



Insúlíndæla


## Abbott

 FreeStyle Freedom Lite.....	14
 FreeStyle InsuLinx .....	14
 FreeStyle Lite.....	14
 FreeStyle Optium Neo.....	14
 FreeStyle Precision Neo.....	14
 Precision Xtra .....	14
 Precision Xceed.....	14

## Acon Laboratories

 On Call® Express.....	14
 On Call® Express II.....	14
 On Call® Express Voice .....	14


## AgaMatrix

 WaveSense Jazz™.....	14
---	----


## Animas

 OneTouch Ping (meter).....	14
--	----


















## Animas

 OneTouch Ping (pump).....	17
 Vibe .....	17

## Arkray

 GlucoCard Shine Connex .....	14
 GlucoCard Shine Express .....	14
 GlucoCard Shine XL .....	14
 ReliOn Premier Blu.....	14
 ReliOn Premier Classic.....	14
 ReliOn Premier Voice.....	14


## Ascensia (Bayer)

 Breeze 2 .....	15
 Contour.....	15
 Contour Care.....	15
 Contour Fit.....	15
 Contour Link .....	15
 Contour Next.....	15
 Contour Next (Bluetooth) .....	15
 Contour Next One.....	15
 Contour Plus .....	15
 Contour Plus One.....	15
 Contour next EZ .....	15
 Contour next Link.....	15
 Contour next Link 2.4 .....	15
 Contour next USB.....	15
 Contour TS.....	15
 Contour XT.....	15
 Contour USB.....	15






## Dexcom

 G4 Platinum.....	17
 G4 Platinum with Share.....	17
 G5.....	17
 Touchscreen Receiver (G5).....	17

## Glucorx

 Nexus.....	15
 Q.....	15


## i-SENS

 alphacheck professional .....	15
 CareSens BGM/TEE2 .....	15
 CareSens N .....	15
 CareSens N POP.....	15
 CareSens N Voice.....	15

## Insulet

 OmniPod®.....	18
 OmniPod® Dash™ System .....	18


## Intuity

 POGO® Automatic™ ..... 15
---


## LifeScan

 OneTouch Select Plus ..... 15
OneTouch Ultra ..... 15
OneTouch Ultra2 ..... 15
OneTouch UltraEasy ..... 15
OneTouch UltraMini ..... 15
OneTouch Verio ..... 15
OneTouch Verio Flex ..... 15
OneTouch Verio IQ ..... 15
OneTouch Verio Reflect ..... 15
OneTouch Verio Sync ..... 15


## Medtronic

 630G ..... 18
640G ..... 18
670G ..... 18


## Menarini

 GlucoMen LX2 ..... 16
---

## Prodigy



 AutoCode ..... 16
---

## Roche


 Accu-Chek Active ..... 16
Accu-Chek Aviva Connect ..... 16
Accu-Chek Aviva Combo ..... 16
Accu-Chek Aviva Expert ..... 16
Accu-Chek Aviva Insight ..... 19
Accu-Chek Aviva Nano ..... 16
Accu-Chek Aviva Plus Black ..... 16
Accu-Chek Aviva Plus Silver ..... 16
Accu-Chek Compact Plus ..... 16
Accu-Chek Guide ..... 16
Accu-Chek Guide Me ..... 16
Accu-Chek Instant ..... 16

Accu-Chek Mobile (USB) ..... 16
Accu-Chek Nano ..... 16
Accu-Chek Performa ..... 16
Accu-Chek Performa Insight ..... 19
Accu-Chek Performa Nano ..... 16


## Roche

 Accu-Chek Aviva Insight ..... 19
 Accu-Chek Performa Insight ..... 19

## Sanofi

 BGStar ..... 16
---

## Tandem

 t:flex ..... 18
 t:slim ..... 18
t:slim G4 ..... 18
t:slim X2 ..... 18

## Trividia (Nipro)

 TRUE METRIX ..... 16
TRUE METRIX AIR ..... 16
TRUEresult ..... 16
TRUEyou mini ..... 16

# Almennar upplýsingar

## Vörulýsing

Glooko-Uploader® er ætlað einstaklingum eða heilbrigðisstarfsfólki á heilbrigðisstofnunum til flutnings forskilgreindra gagna úr heimamælitækjum yfir í gagnagrunn á netþjóni. Tækið má nota eitt sér eða ásamt Glooko-kerfi.

## Ætluð notkun

Glooko er gagnastjórnunarhugbúnaður sem ætlaður er til notkunar á heimilum og heilbrigðisstofnunum til að aðstoða einstaklinga með sykursýki og heilbrigðisstarfsfólk við að fara yfir, greina og meta tækisgögn til stuðnings við meðferð sjúkdómsins. Glooko tengist við samhæf lækningatæki og skráningartól til að notendur geti flutt gögn sín í Glooko-kerfið. Glooko er ekki ætlað til að taka ákvarðanir um meðferð og kemur ekki í stað ráðlegginga heilbrigðisstarfsfólks.

## Studd tæki

Til að hefjast handa þarf að hafa:

1. Samhæfan blóðsykurmæli, insúlíndælu eða samfellda sykurnemamælingu;
2. PC- eða Mac-tölvu með einu eftirfarandi samhæfra stýrikerfa:
  - Windows 8.1 (32 bita og 64 bita)
  - Windows 10 (32 bita og 64 bita)
  - macOS 10.14: Mojave
  - macOS 10.15: Catalina
  - macOS 11.0: Big Sur
3. Glooko Uploader-hugbúnað;
4. Glooko-reikning; og
5. Snúru fyrir samstillingu eða niðurhal úr tæki sem fylgdi með studda sykursýkitækinu.

## Varnaðarorð

Glooko hvorki mælir, túlkar né tekur ákvarðanir um gögnin sem það birtir, því er ekki ætlað að taka sjálfvirkar ákvarðanir um meðferð og það kemur ekki í stað mats heilbrigðisstarfsfólks. Öll sjúkdómsgreining og meðferð skal vera undir eftirliti og umsjón heilbrigðisstarfsfólks.

## Frábendingar


Engin.

# Notkunarleiðbeiningar – Glooko Uploader

Þú þarft að stofna Glooko-reikning til að nota Glooko Uploader. Gögn sem hlaðið er upp með Glooko Uploader samstillast við Glooko-reikninginn, sem þú getur fengið aðgang að með innskráningarupplýsingum Glooko. Internettenging (um WiFi eða farsímakerfi) er nauðsynleg til að gögnin samstillist við Glooko-þjóninn.

## Sjúklingar:

- Á næstu síðu má finna upplýsingar um uppsetningu og upphleðslu gagna með Glooko Uploader.

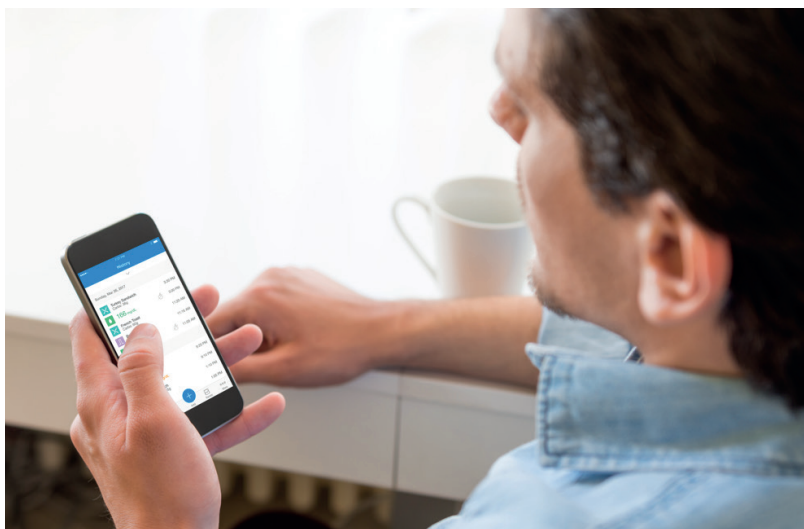

---

## Heilbrigðisstarfsfólk:

- Á síðu 9 má finna upplýsingar um uppsetningu og upphleðslu gagna með Glooko Uploader.



# Sjúklingar

Til að fá aðgang að MyGlooko-stjórnborðinu og sækja Glooko Uploader-hugbúnaðinn þarf Glooko-reikning. Þú getur stofnað Glooko-reikning í Glooko-farsímaforritinu fyrir iOS eða Android. Þú getur einnig haft samband við **notendapjónustu Glooko** (<https://support.glooko.com>) til að fá aðstoð við að stofna reikning. Þegar þú hefur stofnað Glooko-reikning skaltu fylgja leiðbeiningunum hér að neðan.

## 1 Innskráning á MyGlooko-stjórnborðið á <https://my.glooko.com>

- Færðu inn netfang og aðgangsorð.
- Ýttu á „Sign In“ (skrá inn).


### AÐSTOÐ VIÐ INNSKRÁNINGU Á GLOOKO-REIKNING

#### • GLEYMT AÐGANGSORÐ:

Ef þú manst ekki aðgangsorðið sem þú þarft til að skrá þig inn skaltu ýta á **Forgot Password** (gleymt aðgangsorð) til að fá aðgangsorð sent í tölvupósti. Fylgdu leiðbeiningunum á skjánum. Þú getur einnig haft samband við notendapjónustu Glooko til að fá aðstoð.

#### • REIKNINGUR OPNAÐUR:

Ef þú færðir inn rangt aðgangsorð fimm sinnum læsist reikningurinn. Þá verða leiðbeiningar um opnun reikningsins sjálfkrafa sendar á netfang reikningsins. Ef þú færð ekki tölvupóst skaltu smella á **Didn't receive unlock instructions** (fékk ekki leiðbeiningar um opnun) til að fara á opunar síðuna. Fylgdu leiðbeiningunum á skjánum. Þú getur einnig haft samband við notendapjónustu Glooko til að fá aðstoð.

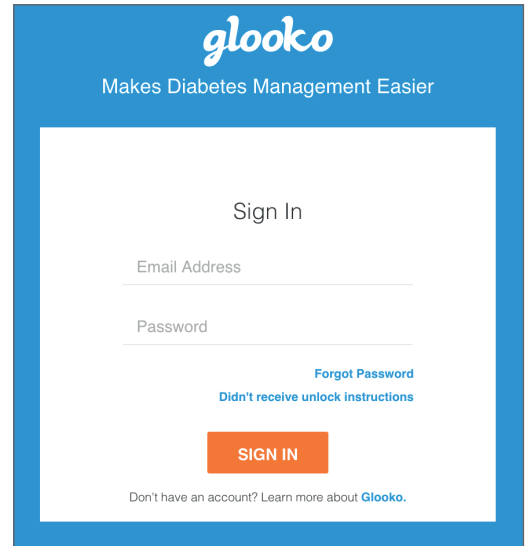

## 2 Uppsetningarskrá hugbúnaðarins sótt

Þegar þú hefur skráð þig inn á MyGlooko-stjórnborðið þarftu að sækja uppsetningarskrána.

- Ýttu á **Settings** (stillingar).
- Flettu neðst á síðuna og smelltu á **Get Glooko Uploader** (sækja Glooko Uploader).
- Þá opnast skjár með hnöppum til að setja upp Glooko Uploader í Mac- eða PC-tölvu. Smelltu á hnappinn Mac eða PC til að sækja uppsetningarskrána.



## 3 Uppsetningarskrá fundin og skráin keyrð

Þú gætir þurft að leita að uppsetningarskránni sem hlaðið er niður, eða hugsanlega opnast sprettigluggi sem býður þér að keyra skrána, allt eftir því hvaða vafra og stýrikerfi þú notar.

- Ef þú ert að nota **PC**-tölvu skaltu athuga möppu með nýlegu niðurbili
- Ef þú ert að nota **Mac**-tölvu skaltu athuga niðurbilsmöppuna í Finder

Þegar þú hefur fundið skrána skaltu tvísmella á hana og fylgja uppsetningarleiðbeiningunum á skjánum. **ATHUGIÐ:** Þú þarft að endurræsa tölvuna í lok uppsetningarferlisins.



# Heilbrigðisstarfsfólk

Til að nota Glooko Uploader-hugbúnaðinn þarf Glooko-reikning fyrir heilbrigðisstarfsfólk og áskrift sem styður Glooko Uploader. Einnig þarf sérstakan tengil til að sækja Glooko Uploader. Hafðu samband við notendabjónustu Glooko (<https://support.glooko.com>) til að fá aðstoð.

## 1 Óskað eftir tengli til að sækja Glooko Uploader-hugbúnaðinn

Heilbrigðisstarfsfólk þarf að óska eftir tengli til að sækja Glooko Uploader-hugbúnaðinn.

- Hafðu samband við notendabjónustu Glooko (<https://support.glooko.com>) til að óska eftir tengli til að sækja Glooko Uploader-hugbúnaðinn.

## 2 Uppsetningarskrá hugbúnaðarins sótt

- Þegar þú færð tengil til að sækja hugbúnaðinn frá Glooko skaltu smella á tengilinn í tölvupóstinum. Þá opnast skjár með hnöppum til að setja upp Glooko Uploader í Mac- eða PC-tölvu. Smelltu á hnappinn Mac eða PC til að sækja uppsetningarskrána.



## 3 Uppsetningarskrá fundin og skráin keyrð

Þú gætir þurft að leita að uppsetningarskránni sem hlaðið er niður, eða hugsanlega opnast sprettigluggi sem býður þér að keyra skrána, allt eftir því hvaða vafra og stýrikerfi þú notar.

- Ef þú ert að nota **PC**-tölvu skaltu athuga möppu með nýlegu niðurrhali
- Ef þú ert að nota **Mac**-tölvu skaltu athuga niðurrhalsmöppuna í Finder

Þegar þú hefur fundið skrána skaltu tvísmella á hana og fylgja uppsetningarleiðbeiningunum á skjánum.

**ATHUGIÐ:** Þú þarft að endurræsa tölvuna í lok uppsetningarferlisins.

# Sjúklingar og heilbrigðisstarfsfólk

Þegar Glooko Uploader hefur verið sett upp (leiðbeiningar fyrir sjúklinga; leiðbeiningar fyrir heilbrigðisstarfsfólk) og tölvun hefur verið endurræst finnurðu tákn Glooko Uploader annaðhvort á skjáborðinu í PC-tölvu eða í möppunni „Applications“ (forrit) í Mac-tölvu.

## 4 Glooko Uploader-hugbúnaðurinn opnaður

- **Finndu** tákn Glooko Uploader á skjáborðinu í PC-tölvu eða í möppunni „Applications“ (forrit) í Mac-tölvu.
- **Tvísmelltu** á tákn Glooko Uploader til að ræsa forritið.

**ATHUGIÐ:** Endurræstu tölvuna áður en þú ræsir Glooko Uploader í fyrsta sinn.



## 5 Innskráning á Glooko-reikning

Þegar Glooko Uploader-forritið opnast þarftu að skrá þig inn á Glooko-reikninginn þinn.

- Færðu inn **netfangið eða notandanafnið þitt**
- Færðu inn **aðgangsorð**
- Ýttu á **Sign In** (skrá inn).


### AÐSTOÐ VIÐ INNSKRÁNINGU Á GLOOKO-REIKNING

Ef þú manst ekki aðgangsorðið sem þú þarft til að skrá þig inn skaltu smella á **Forgot Password** (gleymt aðgangsorð) til að fá aðgangsorð sent í tölvupósti. Þú getur einnig haft samband við notendabjónustu Glooko til að fá aðstoð.


# Sjúklingar og heilbrigðisstarfsfólk


## 6 Eiginleikar Glooko Uploader

### ÚTSKRÁNING AF REIKNINGI


- Þú getur skráð þig út af Glooko-reikningnum með því að ýta á notandahnappinn  neðst til hægri í Glooko Uploader.
- Ýttu á **Log out** (skrá út)


### NOTANDAUPPLÝSINGAR SKOÐAÐAR

- Þú getur skoðað notandaupplýsingar þínar með því að ýta á notandahnappinn  neðst til hægri í Glooko Uploader.
- Þessi sprettigluggi inniheldur:
  - o **Nafn** þitt
  - o **Heimilaðan aðalnotkunarstað** (heilbrigðisstarfsfólk) og tengdan **ProConnect-kóða**
  - o **Netfangið** þitt
- Ýttu á **Log out** (skrá út).

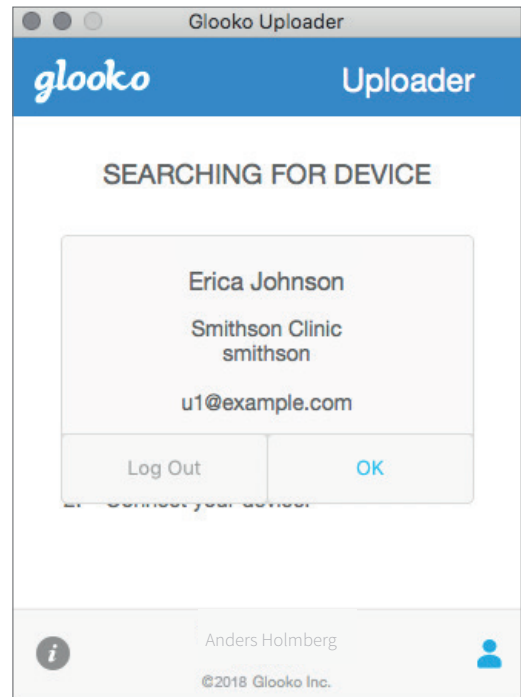

### SJÁ NÁNARI UPPLÝSINGAR UM GLOOKO UPLOADER

- Þú getur skoðað nánari upplýsingar með því að ýta á upplýsingahnappinn  neðst til vinstri í Glooko Uploader.
- Í þessum sprettiglugga eru upplýsingar um notendabjónustu, vörulýsing og yfirlýsing um fyrirhugaða notkun.

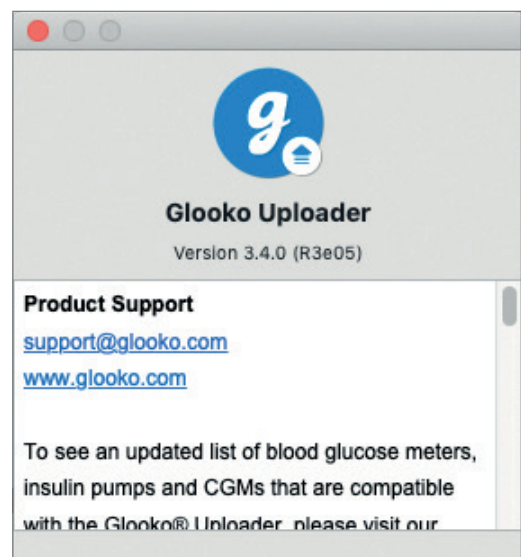

# Sjúklingar og heilbrigðisstarfsfólk


## 7 Sykursýkigögnum hlaðið upp

Þegar þú hefur skráð þig inn í Glooko Uploader getur þú hlaðið upp gögnum úr sykursýkitækinu.

### SNÚRA SYKURSÝKITÆKIS TENGD VIÐ TÖLVU

Eftir innskráningu byrjar Glooko Uploader að leita að tæki.

- Tengdu viðeigandi USB-snúru eða snúru innrauðrar tengingar sykursýkitækisins við tölvuna.
- Þegar tölvan hefur greint snúruna skaltu bíða í nokkrar sekúndur þar til reklar snúrunnar greinast áður en þú tengir tækið.

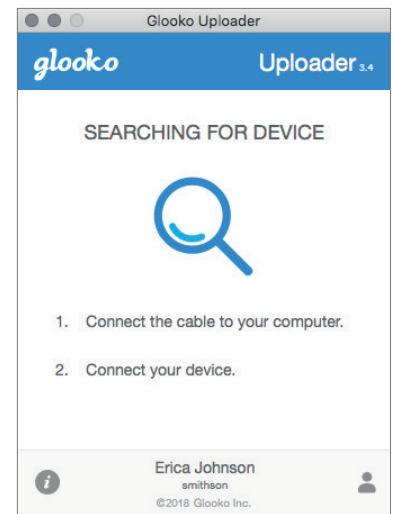


### SYKURSÝKITÆKIÐ TENGT VIÐ SNÚRUNA

- Þegar snúran hefur verið tengd við tölvuna skaltu tengja sykursýkitækið við snúruna.
- Smelltu hér til að fá frekari upplýsingar um hvaða snúru þarf til að hlaða upp úr sykursýkitækinu.

**ATHUGIÐ:** Gakktu úr skugga um að þú notir snúruna sem fylgdi sykursýkitækinu þínu. Ef þú þarft að fá nýja snúru skaltu hafa samband við framleiðanda sykursýkitækisins.

- Þegar þú hefur tengt sykursýkitækið við tölvuna með snúrunni sem fylgdi með tækinu byrjar tækið að hlaða upp gögnum með Glooko Uploader.
- Ef villa kemur upp skaltu fylgja leiðbeiningunum á skjánum til að leysa úr henni. Ef erfiðleikar eru viðvarandi skaltu hafa samband við notendabjónustu Glooko til að fá aðstoð.

**ATHUGIÐ:** Í fyrsta sinn sem þú hleður gögnum upp úr tækinu verður hugsanlega beðið um að þú staðfestir notandareikninginn þinn. Ef beðið er um það skaltu færa inn notandanafn og aðgangsorð til að ljúka upphleðslunni og tengja tækið við reikninginn þinn.

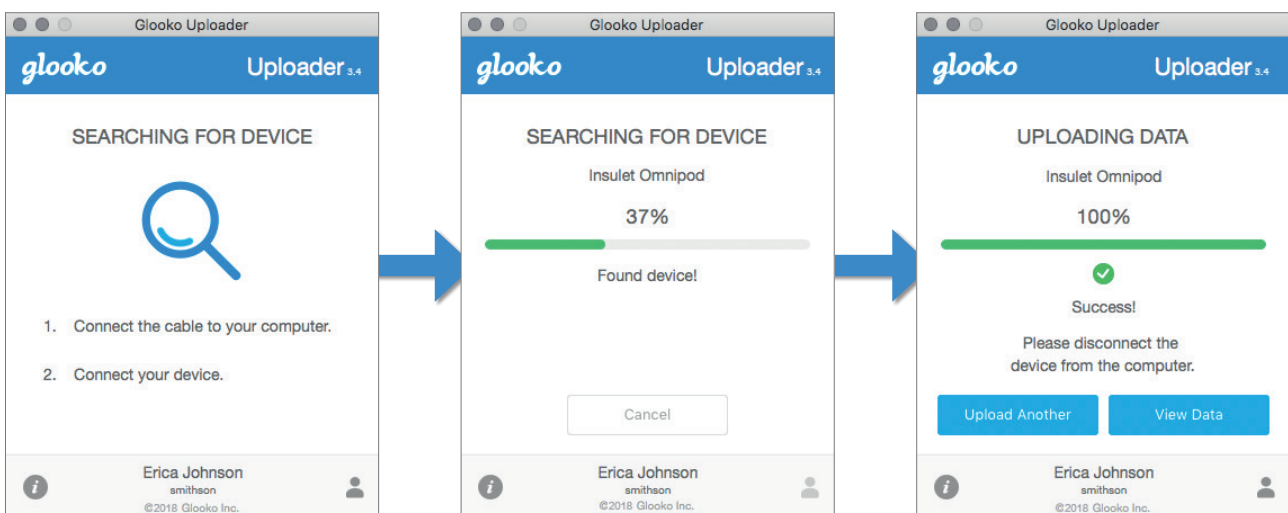

# Sjúklingar og heilbrigðisstarfsfólk

## 8 Sykursýkigögn skoðuð

Þegar gögnum hefur verið hlaðið upp úr sykursýkitækini með Glooko Uploader geturðu skoðað gögnin á <https://my.glooko.com> með því að skrá þig inn á Glooko-reikninginn.

- **Sjúklingar:**

Nánari upplýsingar um vefstjórnborð MyGlooko fást í

[Glooko for Personal Use - Quick Start Guide](#)

á <https://support.glooko.com>

- **Heilbrigðisstarfsfólk:**

Nánari upplýsingar um Population Tracker er að finna í:


[Glooko for Clinics - Quick Start Guide](#)

á <https://support.glooko.com>



# Samhæfð tæki og sendingaraðferðir

Hér fyrir neðan eru leiðbeiningar um hvernig sykursýkigögnum er hlaðið upp til Glooko með diasend® Uploader. Ef sérstakar leiðbeiningar fylgja ekki um upphleðslu fyrir tækið þarf aðeins að tengja það við PC-/Mac-tölvuna með USB-snúru tækisins og þá er gögnunum hlaðið upp sjálfkrafa.

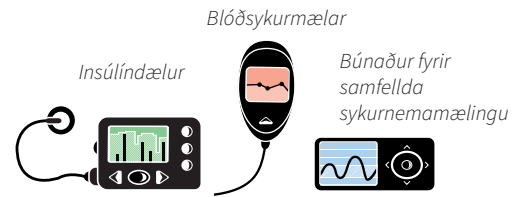

## Blóðsykurmælur – tengdir með USB-snúru

### Abbott

FreeStyle Freedom Lite

FreeStyle Lite

Abbott FreeStyle USB-snúra (2,5 mm)



FreeStyle InsuLinx  
FreeStyle Precision Neo

FreeStyle Optium Neo

Micro USB



Athugaðu að sem stendur er FreeStyle Libre aðeins samhæft í Evrópu!

Precision Xceed

Precision Xtra

Abbott Xceed USB-snúra



### Acon Laboratories

On Call® Express  
On Call® Express II

On Call® Express Voice

On Call USB-snúra (2,5 mm)



### Agamatrix

WaveSense Jazz

Agamatrix USB-snúra



### Animas

OneTouch Ping (meter)

Mini USB



1. Tengdu við tölvuna.  
2. Ýttu á aflrofa mælisins.

### Arkray

Glucocard Shine XL

i-Sens USB-snúra (2,5 mm)



Tengdu og ýttu á hvaða hnapp sem er.

Glucocard Shine Connex  
Glucocard Shine Express

Micro USB




ReliOn Premier Blu (BLE)  
ReliOn Premier Classic  
ReliOn Premier Voice

i-Sens USB-snúra (2,5 mm)





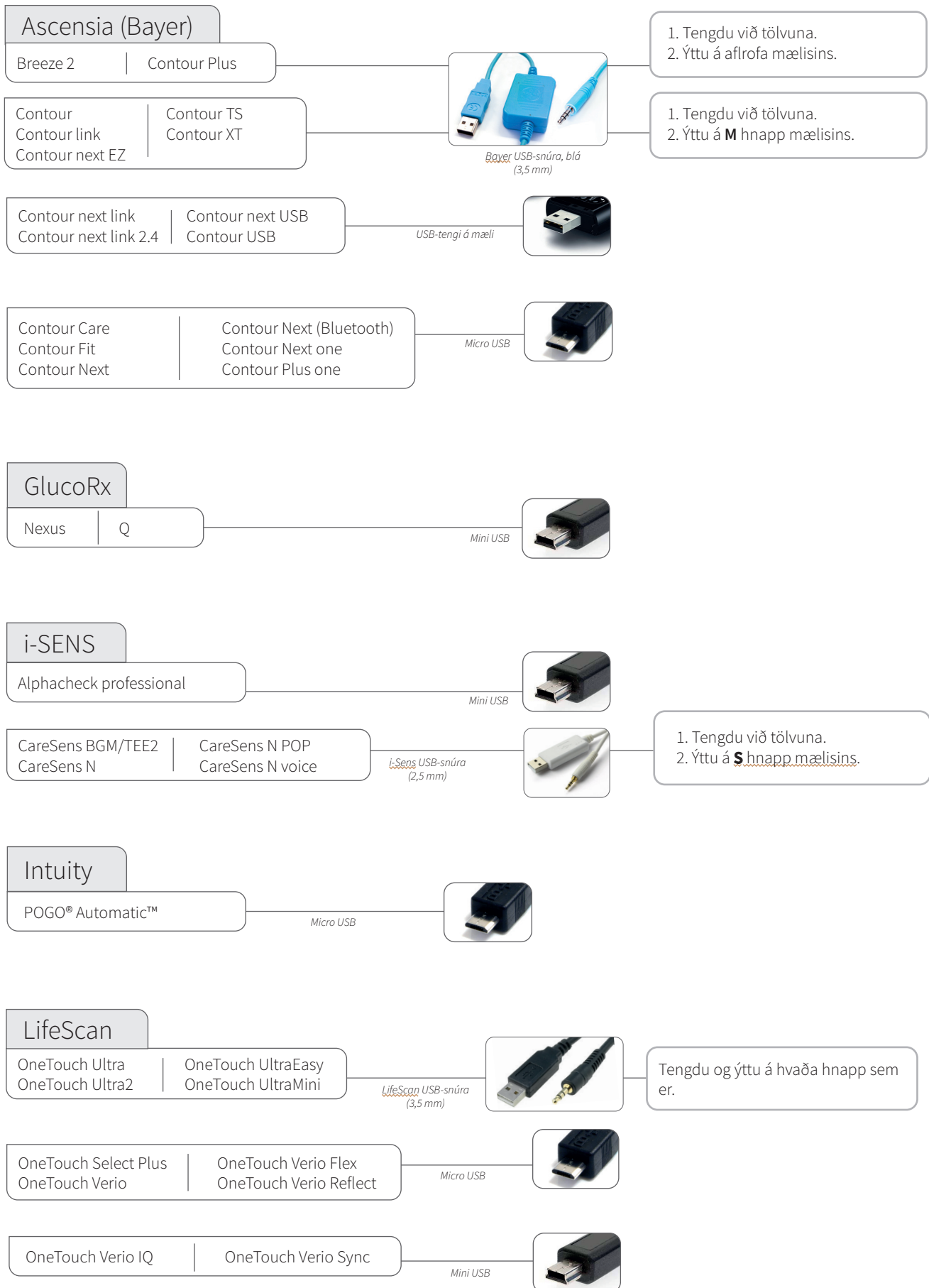


Tengdu og ýttu á hvaða hnapp sem er.


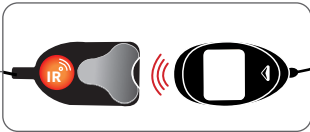

# Blóðsykurmælar – tengdir með USB-snúru



# Blóðsykurmælar – tengdir með USB-snúru

<p><b>Menarini</b></p> <p>GlucoMen LX2</p>	<p>Menarini USB-snúra, blá (3,5 mm)</p>		<p>Ef mælir sýnir: <b>E-3</b> skal aftengja hann þar til það slokknar á skjánum og tengja svo mælinn aftur.</p>
<p><b>Trividia (Nipro)</b></p> <p>TRUEresult   TRUE METRIX AIR TRUE METRIX   TRUEyou mini</p>	<p>USB-snúra Nipro-tengistöðvar</p>		<p>Tengdu og settu mælinn í tengistöðina.</p>
<p><b>Prodigy</b></p> <p>AutoCode</p>	<p>Mini USB</p>		
<p><b>Roche Accu-Chek</b></p> <p>Active   Guide Me Aviva Connect   Instant Guide   Mobile (USB)</p>	<p>Micro USB</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tengdu við tölvuna.</li> <li>2. Upphleðsla ætti að hefjast innan 20 sekúndna frá því að snúran er tengd. Ef það gerist ekki skaltu fara í aðalvalmynd mælisins. Farðu í <b>My data &gt; PC analysis &gt; Data Transfer</b> (gögnin mín &gt; PC-greining &gt; gagnaflutningur) og tengdu mælinn aftur við USB-snúruna. (<i>Ekki halda örvaðhöppunum tveimur inni.</i>)</li> </ol>
<p><b>Sanofi</b></p> <p>BGStar</p>	<p>Sanofi USB-snúra</p>		

# Blóðsykurmælar – með innrauðri tengingu

<p><b>Roche (IR)</b></p> <p>Accu-Chek Aviva Nano Accu-Chek Aviva Plus Black Accu-Chek Aviva Plus Silver Accu-Chek Nano Accu-Chek Performa Accu-Chek Performa Nano</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tengdu snúru innrauðrar tengingar við tölvuna.</li> <li>2. Þegar slökkt er á mælinum skal virkja innrauða sendingu með því að ýta á og halda inni örvaðhöppunum tveimur þar til tvær örvar birtast á skjánum.</li> </ol>
<p>Accu-Chek Compact Plus</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tengdu snúru innrauðrar tengingar við tölvuna.</li> <li>2. Virkjaðu innrauða sendingu með því að halda inni höppunum <b>S</b> og <b>M</b> fyrir neðan skjáinn þar til tvær örvar birtast á skjánum.</li> </ol>
<p>Accu-Chek Aviva Combo Accu-Chek Aviva Expert</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tengdu snúru innrauðrar tengingar við tölvuna.</li> <li>2. Í aðalvalmyndinni skaltu fara í <b>My data</b> (gögnin mín) og velja <b>Data transfer</b> (gagnaflutningur).</li> </ol>




## Samfelld sykurnemamæling – tengd með USB-snúru

**Dexcom**

G4 Platinum  
G4 Platinum with Share  
G5  
Touchscreen Receiver (G5)

Micro USB



Ef upphleðslan hefst ekki skaltu aftengja móttakarann og velja **Shutdown** (slökkva) í valmyndinni til að slökkva á móttakarannum. Kveiktu aftur á móttakarannum og tengdu hann við tölvuna.

## Insúlíndælur – með innrauðri tengingu



**Animas (IR)**

OneTouch Ping  
Vibe







ACTiSYS Li1 eða Li2  
Athugið! Ef þú notar Windows 8 eða 10 þarftu að nota ACTiSYS Li2-snúruna.

- Stöðvaðu dæluna. (MAIN MENU (aðalvalmynd), flettu á **Suspend/Resum** (stöðva/halda áfram) og ýttu á **OK** (í lagi); **Suspend** (stöðva) er auðkennt).
- Ýttu á **OK** (í lagi).
- Settu bakhlið dæluinnar að Actisys-snúru þráðlauss niðurhals með innrauðri tengingu.
- Þegar sendingu er lokið:  
Settu dæluna aftur í gang (MAIN MENU (aðalvalmynd), flettu á **Suspend/Resum** (stöðva/halda áfram) og ýttu á **OK** (í lagi); **Resume** (halda áfram) er auðkennt). Ýttu á **OK** (í lagi).



## Samhæfar innrauðar snúrir

<p><u>ACTiSYS - Li-snúra</u></p>  <p><b>Samhæf stýrikerfi:</b> macOS X: 10.14–11.0 Windows: Á ekki við</p>	<p><u>ACTiSYS - Li2-snúra</u></p>  <p><b>Samhæf stýrikerfi:</b> macOS X: 10.14–11.0 Windows: 8, 10</p>	<p><u>Accu-Chek- 360°snúra (Realtyme)</u></p>  <p><b>Samhæfð stýrikerfi:</b> macOS X: 10.14–11.0 Windows: 8, 10</p>	<p><u>Roche Accu-Chek Smart Pix 2-snúra</u></p>  <p><b>Samhæfð stýrikerfi:</b> macOS X: 10.14–11.0 Windows: 8, 10</p>
---	---	---	--




### Vantar snúru?

Hafðu samband við framleiðanda sykursýkitækisins.

## Insúlíndælar – tengdar með USB-snúru

---

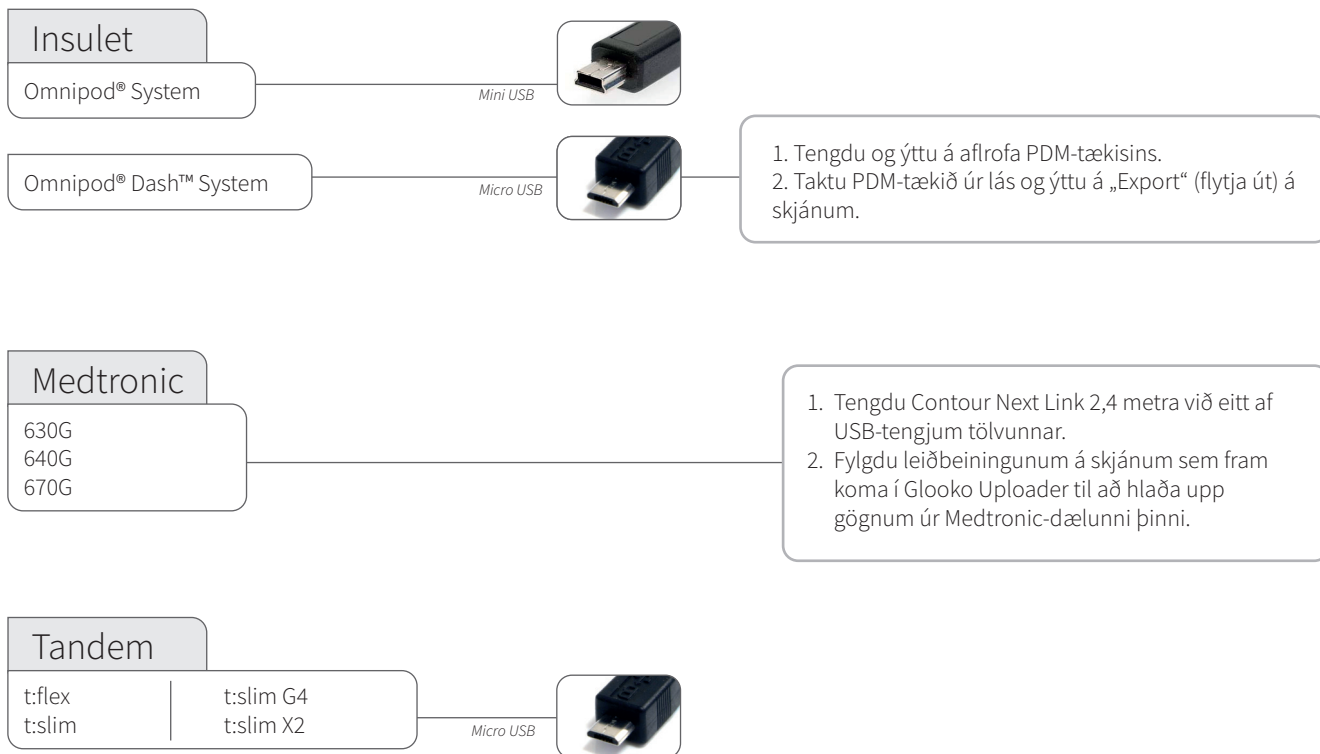

# Insúlíndælar – tengdar með innrauðum snúrum

Samhæfar innrauðar snúrir


Roche Accu-Chek  
Smart Pix-snúra



Roche Accu-Chek  
Smart Pix 2-snúra



Roche  
Accu-Chek Aviva Insight  
Accu-Chek Performa Insight

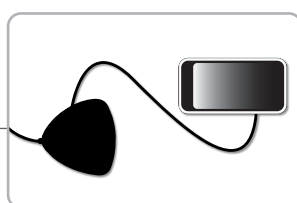

**Smart Pix 2**  
Athugið! Tengdu fjarstýringu dællunnar með micro USB-snúru við Smart Pix 2.

1. Tengdu Smart Pix 2-snúruna við tölvuna og bíddu þar til bláa gaumljósið á Smart Pix 2 byrjar að blikka hægt.
2. Tengdu fjarstýringuna við Smart Pix 2 með micro USB-snúru.
3. Í valmynd fjarstýringarinnar skaltu velja **Connect to PC** (tengja við PC-tölvu) og ýta á **OK** (í lagi).
4. Tryggðu að dælan sé í námunda við fjarstýringuna.
5. Bláa gaumljósið á Smart Pix 2 logar meðan gögn eru send úr tækinu í Smart Pix 2.
6. Það slokknar á bláa gaumljósinu og bæði Smart Pix 2 og tækið gefa frá sér hljóð til merkis um að verið sé að senda gögnin úr Smart Pix 2 í Glooko Uploader. Ekki aftengja Smart Pix 2 strax!
7. Bíddu þar til Glooko Uploader staðfestir að upphleðslan hafi tekist.

CE



Glooko Inc  
411 High Street  
Palo Alto, CA 94301  
Bandaríkin



Glooko AB  
Nellickevägen 20  
SE-412 63 Göteborg  
SVÍPJÓÐ

Notendabjónusta  
help@glooko.com  
<https://support.glooko.com>

[www.glooko.com](http://www.glooko.com)

© 2021 Glooko Inc.

A2044v27B IFU\_IS\_glooko\_uploader (2021-06-29)

IFU-0039-27-IS Rev 02

**glooko**<sup>®</sup>  
BETTER TOGETHER