

*glooko*

GLOOKO® FÜR KLINIKEN  
KURZANLEITUNG

# Inhaltsverzeichnis

Anwendungsbereich.....	3
Warnhinweise.....	3
<b>1. Erste Schritte mit Glooko® .....</b>	<b>4</b>
1.1. Kompatibilität.....	4
1.2. Wählen Sie Ihr Upload-Tool für die Klinik .....	5
1.3. Hochladen und Anzeigen von Patientendiabetesdaten .....	6
Schritt 1: Anschließen und Hochladen eines Diabetesgeräts .....	6
Schritt 2: Zuweisen von Gerätedaten an einen Patienten.....	7
Geräte zuordnen .....	7
Gerätezuordnung aufheben .....	8
Schritt 3: Diabetesdaten des Patienten anzeigen .....	8
Patienten anzeigen .....	8
Patientenzusammenfassung.....	11
<b>2. Übersicht Population Tracker .....</b>	<b>13</b>
2.1. Patientenkonto erstellen .....	13
2.2. ProConnect-Patienten.....	14
2.3. Taggen von Patienten .....	14
2.4. Klinikeinstellungen verwalten .....	15
Mein Profil .....	15
Konto .....	16
Profil der Einrichtung.....	16
Dateneinstellungen .....	16
Terminaleinstellungen.....	17
Bevorzugte PDF-Einstellungen .....	17
2.5. Patienteneinstellungen verwalten .....	18
Profil.....	19
Konto .....	19
Dateneinstellungen .....	20
Geräte .....	21
Omnipod® PDM hochladen .....	21
iGlucose-Geräte verbinden.....	22
Kontoverwaltung.....	22
<b>3. Berichtsübersicht.....</b>	<b>23</b>

3.1. Verfügbare Berichte.....	23
3.2. Berichte erstellen.....	23
4. Support.....	25
Anhang 1: Zusätzliche Funktionen .....	26
A.1. Fallmanagement .....	26
Kontaktflaggen.....	26
Status .....	26
A.2. Mobile Insulin Dosing System (MIDS)* .....	27
A.3. DreaMed Advisor* .....	27
A.4. Neuer Population Tracker .....	28
Benutzerdefinierte Tags .....	28
Von der Patientenliste einladen .....	28
A.5. Mellitus Health* .....	29
A.6. Wichtige Statistiken kopieren* .....	30
A.7. Glooko Clinical Research.....	31
Teilnehmer-ID.....	31
Patienten entfernen .....	31
Research Uploader .....	32
A.8. Zwei-Faktor-Authentifizierung.....	33
A.9. Single Sign-On .....	34
A.10. Betreuungsprogramme.....	34
Anhang 2: Gerätespezifische Funktionen.....	36
B.1. Kontroll-IQ.....	36

## Anwendungsbereich

Glooko ist eine Software zum Datenmanagement für den Heimgebrauch und zur Verwendung in einer Klinikumgebung, um Personen mit Diabetes und das sie betreuende medizinische Fachpersonal bei der Prüfung, Analyse und Auswertung von Gerätedaten zur Anwendung eines effektiven Diabetesmanagement-Programms zu unterstützen. Glooko kann mit kompatiblen Medizinprodukten und Trackern verbunden werden, wodurch Anwender ihre Daten an das Glooko-System übertragen können.

Glooko dient nicht dazu, Behandlungsentscheidungen zu treffen, und ist nicht als Ersatz für eine professionelle ärztliche Beratung zu verstehen.

## Warnhinweise

Das Glooko®-Gerätesystem für die Glooko-Anwendung nimmt keine Messungen oder Auswertungen vor und trifft keine Entscheidungen zu den angezeigten Daten, dient nicht dazu, automatische Behandlungsentscheidungen zu treffen, und ist nicht als Ersatz für eine professionelle Beratung zu verstehen. Alle medizinischen Diagnosen und Behandlungen sind unter Überwachung und Aufsicht von qualifiziertem medizinischen Personal durchzuführen.

# 1. Erste Schritte mit Glooko®

Glooko ist eine vereinheitlichte Plattform für das Diabetesmanagement, die Blutzucker (BZ) und andere relevante Gesundheitsdaten von verbreiteten Glukosemessgeräten, Insulinpumpen, Systemen zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM) und Gesundheits- und Fitnessgeräten nahtlos synchronisiert. Die Lösung von Glooko bietet entscheidende Einblicke in Zusammenhänge zwischen Glukosetrends des Patienten und dessen Kohlenhydratmenge, Insulindosierung, Aktivität und anderen biometrischen Faktoren – so können Diabetesteamer informiertere Entscheidungen treffen und die allgemeine Qualität der Diabetesversorgung verbessern. Durch das Hinweisen auf Probleme ermöglicht Glooko es Ärzten, ihre Diabetespatienten während und zwischen den Terminen effizienter einzustellen und zu behandeln.

**HINWEIS:** Aufgrund weiterer Funktionen, die Ihrem Abonnement eventuell hinzugefügt wurden, können einige Bildschirme anders aussehen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im [Anhang: Zusätzliche Funktionen](#).

## 1.1. Kompatibilität

Glooko unterstützt die folgenden Webbrowser-Versionen:

- Internet Explorer Version 11 oder aktueller
- Internet Explorer Edge Version 44 oder aktueller
- Google Chrome Version 57 oder aktueller
- Firefox Version 51 oder aktueller
- Safari Version 8 oder aktueller

Um die Kompatibilität eines Patientendiabetesgeräts festzustellen, gehen Sie auf die Seite [Kompatibilität mit Glooko](#).

## 1.2. Wählen Sie Ihr Upload-Tool für die Klinik

Der Vorgang zum Hochladen von Patientendiabetesdaten variiert basierend auf dem Upload-Tool Ihrer Klinik oder Praxis. Lesen Sie die entsprechende Kurzanleitung für ausführliche Anweisungen zum Hochladen von Daten mit jedem Tool:

- [Glooko Transmitter](#)
- [diasend® Transmitter](#)
- [Glooko Uploader](#)
- [Glooko Kiosk\\*](#)

*\* Zurzeit nur in den USA erhältlich.*


## 1.3. Hochladen und Anzeigen von Patientendiabetesdaten

Sobald Sie die Kompatibilität Ihres Diabetesgeräts und des Upload-Tools Ihrer Klinik bestimmt haben, befolgen Sie die Schritte zum Hochladen von Patientendiabetesdaten in Glooko:

### Schritt 1: Anschließen und Hochladen eines Diabetesgeräts

Verbinden Sie das Diabetesgerät eines Patienten mit dem [Upload-Tool der Klinik](#) und starten Sie den Prozess zum Hochladen gemäß den Schritten in der entsprechenden Kurzanleitung.

Sobald das Diabetesgerät die Daten hochgeladen hat, gehen Sie zu [my.glooko.com](https://my.glooko.com) in Ihrem Webbrowser und melden Sie sich bei Ihrem Population Tracker an, um die hochgeladenen Daten zuzuordnen oder anzuzeigen.

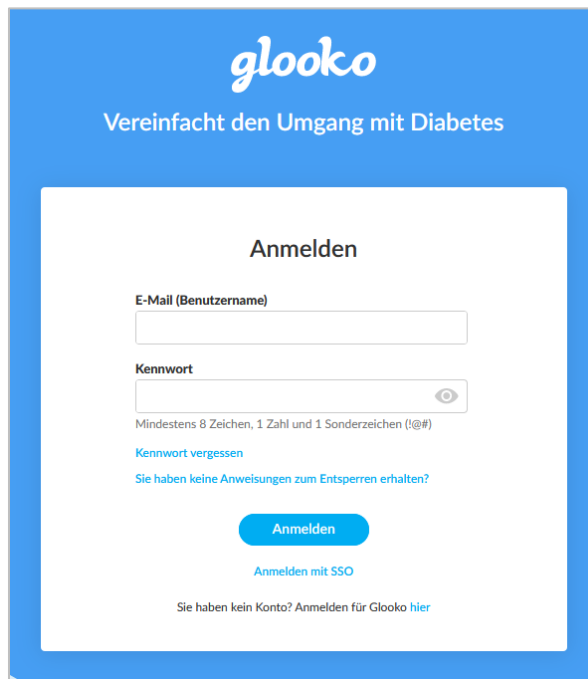

HINWEIS: Wenn Single Sign-On für Ihre Klinik aktiviert ist, klicken Sie auf „Log In with SSO“ (Anmelden mit SSO), geben Sie die mit Ihrem Konto verknüpfte E-Mail-Adresse ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

## Schritt 2: Zuweisen von Gerätedaten an einen Patienten

**HINWEIS:** Dieser Schritt trifft nur für Anwender von Glooko Transmitter und Uploader zu. Alle anderen Anwender können zu [Schritt 3](#) weitergehen.

### Geräte zuordnen

Klicken Sie auf die Registerkarte **Geräte zuordnen**, um eine Liste aller in den letzten 24 Stunden hochgeladenen Geräte zu sehen. Hier haben Sie die Option, nach **Terminal** (Seriennummer) oder **Gerätetyp** (CGM-System, Messgerät oder Pumpe) zu filtern.

Glooko wird versuchen, hochgeladene Geräte basierend auf der Seriennummer des Geräts einem Patienten zuzuordnen.

- **Falls eine Übereinstimmung gefunden wurde:** Sie können wählen zwischen **Zuordnen zu [Patientenname]** oder **Anderem Patienten zuordnen**.
  - Nachdem Sie auf **Anderem Patienten zuordnen** geklickt haben, werden Sie aufgefordert, nach einem bestehenden Patientenkonto zu suchen oder [ein neues Patientenkonto zu erstellen](#).
- **Falls keine Übereinstimmung gefunden wurde:** Das Gerät wird als **Neues Gerät** gekennzeichnet und Sie haben die Möglichkeit, es **zuzuordnen**.
  - Nachdem Sie auf **Zuordnen** geklickt haben, werden Sie aufgefordert, nach einem bestehenden Patientenkonto zu suchen oder [ein neues Patientenkonto zu erstellen](#).

Geräteart		Letzte Synchronisierung	Zuordnung
<b>Nicht zugeordnet</b>			
OmniPod Pumpe   130337586	14:53 U39637637	<a href="#">Zuordnen zu Lucy Test</a> 01.01.1970	<a href="#">Anderem Patienten zuordnen</a>
OneTouch VerioIQ Messgerät   TGKFX1T7	14:52 U39637637	<a href="#">Zuordnen zu George Testerson</a> 10.06.1962	<a href="#">Anderem Patienten zuordnen</a>
Contour Next Link US Messgerät   6203-C16DAE	11:45 U39637637	Neues Gerät	<a href="#">Assign</a>
<b>Kürzlich zugeordnet</b>			
✓ Ascensia Contour Next One Messgerät   7830H6130960	11:48 U39637637	<a href="#">Lucy Test</a> 01.01.1970	<a href="#">Bericht erstellen</a>   <a href="#">Zuordnung aufheben</a>



Sobald ein Gerät zugeordnet wurde, wechselt es von „Nicht zugeordnet“ zu „Kürzlich zugeordnet“. Sie haben die Option, das Patientenkonto anzuzeigen, **Berichte zu erstellen** oder die **Zuordnung aufzuheben**.

## Gerätezuordnung aufheben

Wenn Sie ein Gerät irrtümlich zuordnen und die Zuordnung von einem Patientenkonto wieder aufheben müssen, klicken Sie im Abschnitt Kürzlich zugeordnet neben dem Gerät auf **Zuordnung aufheben**. Das Gerät wechselt von Kürzlich zugeordnet zu Nicht zugeordnet, und alle mit diesem Upload verbundenen Daten werden aus dem Patientenkonto entfernt. Sie haben dann die Möglichkeit, das Gerät einem anderen Patienten zuzuordnen.

**HINWEIS:** Klicken Sie auf **Liste aktualisieren**, um die Liste der zugeordneten und nicht zugeordneten Geräte zu aktualisieren.

## Schritt 3: Diabetesdaten des Patienten anzeigen

### Patienten anzeigen

Die Patientenliste zeigt eine durchsuchbare Liste aller Patienten an, die über ProConnect mit Ihrer Klinik verbunden sind (durch den spezifischen [ProConnect-Code](#) Ihrer Klinik). Dies bietet eine übersichtliche Ansicht der Diabetesdaten Ihrer Patientenpopulation.

The screenshot shows the Glooko web interface. At the top, there is a search bar with the text 'Name' and a search icon, and a dropdown menu. To the right, it says 'Diabetes Clinic ProConnect-Code: 1234567' and a user profile icon 'JP'. Below the search bar, there are two tabs: 'Geräte zuordnen (3)' and 'Patienten anzeigen', with the latter being highlighted by an orange box. To the right of the tabs is a link 'Patientenkonto erstellen'. Below the tabs, there is a section for 'Patienten filtern' with a dropdown arrow. A summary box displays statistics: 'Daten für Durchschnitt BZ, Durchschnitt CGM und BZ-Flaggen Stamm von einer 30-tägigen Probe, die am Datum der letzten Gerätesynchronisierung endet.' Below this, there are three rows of statistics: '≥ 25% der Werte liegen über 13,9', '≥ 10% der Werte liegen unter 3,9', and 'Hoher Wert (über 22,2)'. Below the statistics, there is a table with columns: NAME, LETZTE SYNCHRONISIERUNG (Geräteart), DURCHSCHNITT BZ (Messwerte/Tag), DURCHSCHNITT CGM (Aktive Tage), and BZ-FLAGGEN. The table contains three rows of patient data.

NAME	LETZTE SYNCHRONISIERUNG Geräteart	DURCHSCHNITT BZ Messwerte/Tag	DURCHSCHNITT CGM Aktive Tage	BZ-FLAGGEN
George Testerson	Heute Messgerät	8,4 1,4		🔴 🔴 🔴
Lucy Test	Gestern System zur kontinuierlichen Glukosemessung	- 0	9 30	
Sally Testing	Gestern Messgerät	7,8 1,3		🔴 🔴


Um bestimmte Patienten zu finden, wählen Sie **Name**, **MRN** oder **Geburtsdatum** aus dem Dropdown-Menü oben auf der Seite aus und geben Sie Ihre Suchkriterien in das Suchfeld ein. Sie können auch auf **Patienten filtern** klicken, um Ihre Ergebnisse nach Tags oder anderen Eigenschaften zu filtern, oder Patienten sortieren, indem Sie auf eine der Spaltenüberschriften klicken.

Die folgenden Informationen werden angezeigt:

- **Name:** Dies zeigt den Vor- und Nachnamen des Patienten an. Fahren Sie über den Patientennamen, um Geburtsdatum und Diabetestyp zu sehen.  
**HINWEIS:** Falls sich links neben dem Patientennamen ein Gerätesymbol befindet, zeigt dies an, dass der Patient die Glooko Mobile App nutzt. Ein blaues Gerät zeigt an, dass zuletzt von zu Hause Daten synchronisiert wurden, und ein graues Gerät zeigt an, dass zuletzt Daten in der Klinik hochgeladen wurden.
- **Letzte Synchronisierung:** Dies zeigt die Anzahl der Tage seit der letzten Synchronisierung des Patienten an, außerdem den zuletzt synchronisierten Gerätetyp. Fahren Sie über „Letzte Synchronisierung“, um den entsprechenden Gerätenamen und Ort anzuzeigen.
- **Durchschnittlicher BZ:** Dies zeigt den durchschnittlichen Blutzuckerwert (BZ) des Patienten der 30 Tage vor dem letzten Synchronisationsdatum des Geräts an. Die durchschnittliche Anzahl an Messwerten pro Tag wird unter dem durchschnittlichen BZ angezeigt.
- **Durchschnitt CGM-System:** Dies zeigt den durchschnittlichen Wert des Systems zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM) des Patienten der 30 Tage vor dem letzten Synchronisationsdatum des Geräts an. Die Anzahl der aktiven Tage, in denen das CGM-System in den letzten 30 Tagen verwendet wurde, wird ebenfalls angezeigt.

- **BZ-Flaggen:** Diese werden auf der Grundlage von BZ-Messwerten ausgelöst, die in den 30 Tagen vor dem letzten Synchronisationsdatum des Geräts aufgezeichnet wurden und außerhalb der voreingestellten Bereiche liegen.

Farben werden verwendet, um anzuzeigen, ob die Messwerte innerhalb von 30 Tagen seit dem letzten Synchronisationsdatum oder weiter zurückliegen.

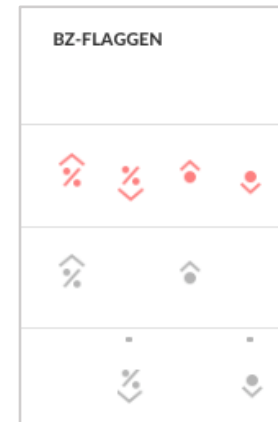

- **Rote BZ-Flaggen:** Diese weisen darauf hin, dass die Messwerte innerhalb von 30 Tagen nach dem letzten Synchronisationsdatum liegen.
- **Graue BZ-Flaggen:** Diese weisen darauf hin, dass die Messwerte mehr als 30 Tage seit dem letzten Synchronisationsdatum zurückliegen.

Wenn Sie über eine Flagge fahren, werden zusätzliche Informationen angezeigt, darunter:

- Anzahl oder Prozentsatz der Messwerte, die über oder unter dem Zielbereich liegen.
- Ob die BZ-Flagge auf einer patientenspezifischen Einstellung beruht oder nicht.


**HINWEIS:** Die Bereiche können auf Populationsebene unter Klinikeinstellungen > [Dateneinstellungen](#) oder auf Patientenebene unter Patienteneinstellungen > [Dateneinstellungen](#) eingestellt werden.

## Patientenzusammenfassung

Klicken Sie auf einen Patienten, um zur Patientenzusammenfassung zu gelangen, die eine Übersicht der Diabetesdaten des Patienten liefert.

Sie können zusätzliche Daten durch Wechseln zwischen den Registerkarten oben an der Navigationsleiste anzeigen sowie PDF-[Berichte](#) erstellen, um Daten zu drucken, zu teilen oder zu speichern.

**HINWEIS:** Klicken Sie auf **Profil** oben links auf dem Bildschirm, um die [Patienteneinstellungen](#) anzuzeigen und zu verwalten.

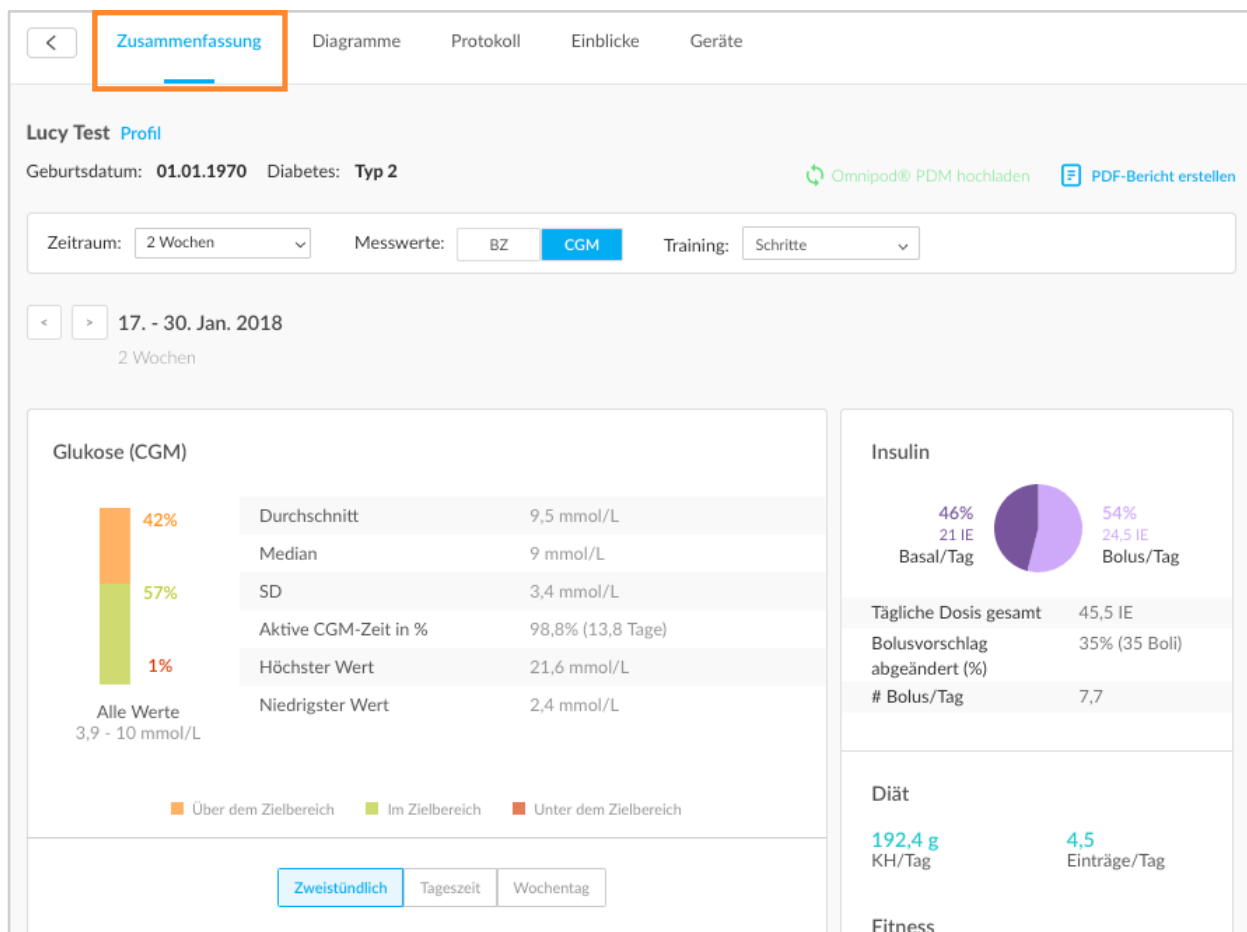

**HINWEIS:** Alle Insulindaten werden unter **Insulin** zusammengefasst – es sei denn, die Daten des Patienten stammen von einer Insulinpumpe und einem Smart Pen (und/oder manuell eingetragene Daten). In diesem Fall werden die Insulinpumpendaten als **Insulin – Pumpe** angezeigt, während Insulindaten von einem Smart Pen (und/oder manuell eingetragene Daten) als **Insulin – Andere** dargestellt werden. Wenn ein Patient über eine Pumpe mit Control-IQ

verfügt, wird auf der Seite „Zusammenfassung“ unter „Insulin“ eine zusätzliche Informationskarte mit der Bezeichnung **Systemeinzelheiten** dargestellt. Weitere Informationen finden sich unter [B.1. Control-IQ](#).

## 2. Übersicht Population Tracker

Die Verfügbarkeit der unten aufgeführten Funktionen hängt von Ihrem Abonnement-Modell und Ihrer Region ab. Für weitere Informationen zu den hier beschriebenen Funktionen wenden Sie sich direkt an Ihren Kundenbetreuer von Glooko oder per E-Mail an [sales@glooko.com](mailto:sales@glooko.com).

**HINWEIS:** Ihre Patientenliste kann anders aussehen, wenn Sie die neue Version von Population Tracker benutzen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in [A.4. Neuer Population Tracker](#).

### 2.1. Patientenkonten erstellen

Falls der Patient neu in Ihrer Klinik ist, haben Sie die Möglichkeit, ein neues Patientenkonto aus der Patientenliste zu erstellen.

Zum Erstellen eines Patientenkontos:

1. Klicken Sie auf **Patientenkonto erstellen** oben rechts am Bildschirm.
2. Geben Sie die folgenden Informationen ein:
  - Vorname
  - Nachname
  - Geburtsdatum
  - E-Mail-Adresse
  - Postleitzahl
  - Patientenaktennummer (optional)
  - Telefonnummer (optional)
  - Diabetes-Typ (optional)
  - Geschlecht (optional)


**HINWEIS:** Wenn Sie ein Konto außerhalb der USA einrichten, müssen Sie vom Patienten auch die Zustimmung zur Datenweitergabe einholen.

3. Klicken Sie auf **Erstellen**.
  - Der Patient erhält eine E-Mail mit einem Link, um ein Passwort für das neue Konto festzulegen.

The screenshot shows a form titled "Patientenkonto erstellen" with a close button (X) in the top right corner. Below the title is a descriptive text: "Neues Patientenkonto erstellen, um die Daten in der Einrichtung zu synchronisieren und per ProConnect mit Ihrer Einrichtung zu verbinden." The form contains several input fields and dropdown menus: "Vorname" (text input), "Nachname" (text input), "Geburtsdatum" (three dropdown menus for Tag, Monat, and Jahr), "E-Mail-Adresse" (text input), "Postleitzahl" (text input), "Patientenaktennummer (Optional)" (text input), "Telefonnummer (Optional)" (text input), "Diabetes-Typ (Optional)" (dropdown menu with "Auswählen ..." selected), and "Geschlecht (Optional)" (dropdown menu with "Auswählen ..." selected). At the bottom right, there are two buttons: "Abbrechen" and "Erstellen".

## 2.2. ProConnect-Patienten

Den spezifischen ProConnect-Code Ihrer Klinik finden Sie oben rechts auf der Startseite Ihres Population Trackers. Damit Ihre Patienten ihre Diabetesdaten von überall aus mit der Klinik teilen können, müssen Sie dem Glooko-Patientenkonto den spezifischen Code Ihrer Klinik hinzufügen.

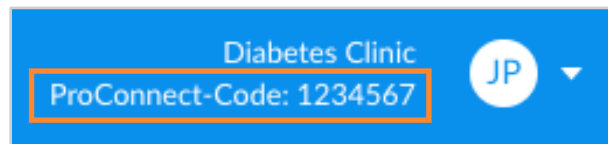

## 2.3. Taggen von Patienten

Klicken Sie in der Patientenliste mit der rechten Maustaste auf einen Patienten und fahren Sie mit der Maus über die **Tags**, um die mit Ihrer Klinik verbundenen Gesundheitsdiensteanbieter anzuzeigen, die mit einem Patienten verknüpft werden können. Wählen Sie einen Diensteanbieter aus der Liste aus, und ein automatisch generiertes, farbiges Kästchen mit den Initialen des Anbieters wird unterhalb des Patientennamens angezeigt und weist darauf hin, dass der Tag hinzugefügt wurde.

NAME	LETZTE SYNCHRONISIERUNG
George Testerson	Geräteart Heute Messgerät
Lucy Test D2 AD	Bericht drucken Patienteneinstellungen
Sally Testing	Tags

Zu jedem Patientenkonto können mehrere Diensteanbieter-Tags hinzugefügt werden. Sie können Patienten nach Tags und anderen Eigenschaften filtern, indem Sie auf das Drop-down-Menü **Patienten filtern** oben links in Ihrer Patientenliste klicken.

## 2.4. Klinikeinstellungen verwalten

Durch Auswählen von **Einstellungen** im Drop-down-Menü oben rechts auf der Startseite Ihres Population Trackers erhalten Sie Zugriff auf die Klinikeinstellungen. Sie haben die Möglichkeit, Ihr Profil und Ihre Kontoinformationen zu aktualisieren, das Profil Ihrer Einrichtung anzusehen und Ihre Dateneinstellungen und Terminaleinstellungen einzusehen.

The screenshot shows the Glooko user interface. At the top, there is a blue header with the Glooko logo, a search bar for patient names, and user information for 'Diabetes Clinic' with a ProConnect-Code of 1234567 and a user profile icon 'JP'. A dropdown menu is open, showing 'Jessica Providerly' and options for 'Einstellungen' (highlighted), 'Hilfe', and 'Abmelden'. Below the header, the 'Mein Profil' section contains three input fields: 'Berufsbezeichnung' (Arzt (Dr)), 'Vorname' (Jessica), and 'Nachname' (Providerly). A 'Speichern' button is located to the right. The 'Konto' section below shows 'E-Mail-Adresse' (drqa@example.com), 'Passwort' (masked), and 'Sprache' (Deutsch), with links to change each. The 'Profil der Einrichtung' section shows 'Einrichtung' (Diabetes Clinic), 'Gruppe' (Glooko Medical Group), and 'ProConnect-Code' (1234567), along with a 'Kontakt der Einrichtung' field.

### Mein Profil

Unter **Einstellungen** > **Mein Profil** können Sie Ihre Berufsbezeichnung sowie Ihren Vor- und Nachnamen ändern. Klicken Sie auf **Speichern**, um Ihre Änderungen zu speichern.



## Konto

Unter Einstellungen > Konto können Sie Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Passwort und die Standardsprache in Ihrem Konto aktualisieren.

## Profil der Einrichtung

Unter Einstellungen > Profil der Einrichtung können Sie die Seite Ihrer Klinik, die Gruppe, den [ProConnect-Code](#) und die Kontaktdaten der Einrichtung einsehen.

## Dateneinstellungen

Unter Einstellungen > Dateneinstellungen können Sie die Anzeige Ihrer Patientendaten auf Populationsebene, darunter Maßeinheiten, Einstellungen für händisch eingegebene BZ-Werte aus der Insulinpumpe und Parameter für Populationsflaggen anpassen. Klicken Sie auf **Speichern**, um Ihre Änderungen zu speichern.

Anzeige der folgenden Einstellungen:

- **Maßeinheit:** Dies kann auf **mg/dl** oder **mmol/l** geändert werden.

**HINWEIS:** Die Anpassung dieser Einstellungen aktualisiert die Einheitenanzeige Ihres Population Trackers für BZ-Flaggen, aktualisiert aber nicht die Gerätedaten des Patienten.

- **Einstellungen für händisch eingegebene BZ-Werte aus der Insulinpumpe:** Dies kann auf **Ja** oder **Nein** eingestellt werden, um händisch eingetragene BZ-Messwerte aus Insulinpumpen in den Diagrammen und Statistiken für Ihre gesamte Patientenpopulation einzubeziehen oder auszulassen. Standardmäßig werden diese

Dateneinstellungen

Maßeinheit  mg/dL  mmol/L

BZ-Eintrag durch Pumpe [Standard wiederherstellen](#)

In die Statistik einfügen  Ja  Nein

Populationsflaggen-Einstellungen [Standard wiederherstellen](#)

25 % der Messwerte sind über 13,9 mmol/L

10 % der Messwerte sind unter 3,9 mmol/L

Ein hoher Wert liegt über 22,2 mmol/L

Ein niedriger Wert liegt unter 2,8 mmol/L

**Speichern**

Terminaleinstellungen

Transmitter

SERIENNUMMER	DATUM DES LETZTES SIGNALCHECKS	SIGNALSTÄRKE	SIGNALQUALITÄT	NAME
S15050238	2018-04-24 00:15:12	Genial	Genial	S15050238

**Speichern**

Werte einbezogen.

**HINWEIS:** Sie können dies außerdem auf Patientenebene unter Patienteneinstellungen > [Dateneinstellungen](#) anpassen. Die Einstellungen auf Patientenebene haben stets Vorrang vor Einstellungen auf Populationsebene.

- **Populationsflaggen-Einstellungen:** Durch Anpassen dieser Einstellungen werden die Flaggenparameter für alle Patienten in Ihrer Diabetespopulation aktualisiert. Zum Ändern dieser Einstellungen klicken Sie auf das Feld mit dem Wert, den Sie ändern möchten, und geben einen neuen Wert ein.

**HINWEIS:** Sie können die Flaggenparameter außerdem auf Patientenebene unter Patienteneinstellungen > [Dateneinstellungen](#) anpassen. Die Einstellungen auf Patientenebene haben stets Vorrang vor Einstellungen auf Populationsebene.

## Terminaleinstellungen

Unter Einstellungen > Terminaleinstellungen können Sie die Namen Ihrer installierten Glooko Transmitter und Uploader anpassen und die Upload-Tools einsehen, die aktuell mit Ihrem Konto verbunden sind. Alle Änderungen werden in der Registerkarte „Zugeordnete Geräte“ Ihres Population Trackers aufgeführt.

Falls sich in Ihrem Konto Glooko Transmitter-Geräte befinden, werden die Seriennummer, das Datum des letzten Signalchecks, die Signalstärke, Signalqualität und der Name angezeigt. Falls sich in Ihrem Konto Glooko Uploader befinden, werden die Seriennummer und der Name angezeigt.

Die Namen des Glooko Transmitters und des Uploaders können durch Klicken auf das Feld **Name** des Tools, das Sie ändern möchten, und Eingeben eines neuen Namens geändert werden. Klicken Sie auf **Speichern**, um Ihre Änderungen zu speichern.

## Bevorzugte PDF-Einstellungen

Unter Einstellungen > Bevorzugte PDF-Einstellungen können Sie Bevorzugte Profile anzeigen, ändern oder neu hinzufügen. Favoriten werden auf Populationsebene hinzugefügt und erscheinen im Drop-down-Menü der bevorzugten PDF-Einstellungen beim Erstellen von PDF-[Berichten](#) in einem Patientenkonto.

Um einen neuen Favoriten hinzuzufügen, klicken Sie auf **+ Neuer Favorit**, geben Sie einen Profilnamen für den Favoriten ein (klicken Sie auf OK), wählen Sie ein Zeitfenster aus, wählen Sie die zu berücksichtigenden Berichte aus, wählen Sie einen Druckmodus und klicken Sie auf **Speichern**.




## 2.5. Patienteneinstellungen verwalten

In den Patienteneinstellungen haben Sie die Möglichkeit, die Profilvereinerungen eines einzelnen Patienten zu aktualisieren, E-Mails des Kontos anzusehen oder Aktivierungsanfragen zu senden, Dateneinstellungen anzupassen, Zielbereiche für BG, Markierungsparameter und Tageszeitbereiche festzulegen, ein Omnipod-System hochzuladen, ein Medtronic CareLink Personal Account zu verbinden und iGlucose-Geräte anzuschließen. Alle Änderungen werden im Glooko-Konto des Patienten angezeigt.

Zum Anzeigen oder Aktualisieren von Kontoeinstellungen des Patienten:

1. Anzeigen oder Suchen eines Patienten in der Patientenliste.
2. Rechtsklick auf den Patienten und **Patienteneinstellungen** auswählen.

**HINWEIS:** Sie erreichen dies auch, indem Sie auf **Profil** links oben in der [Patientenzusammenfassung](#) klicken.

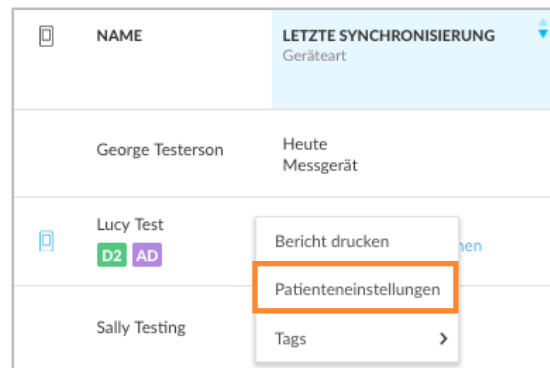

## Profil

Unter Patienteneinstellungen > Profil können Sie die demografischen Angaben eines Patienten anzeigen und ändern, darunter Name, Geschlecht, Diabetestyp, Geburtsdatum, Größe, Gewicht und Patientenaktennummer. Klicken Sie auf **Speichern**, um Ihre Änderungen zu speichern.

### Lucy Test Profil

<b>Vorname</b> Lucy	<b>Nachname</b> Test	<b>Geburtsdatum</b> 1   Januar   1970		
<b>Diabetes-Typ</b> Typ 2	<b>Geschlecht</b> Weiblich	<b>Größe</b> 167 cm	<b>Gewicht</b> 73 lbs	
<b>Patientenaktennummer</b> 123456				

**Speichern**

## Konto

Unter Patienteneinstellungen > Konto können Sie den Kontostatus eines Patienten anzeigen und eine hinterlegte E-Mail-Adresse hinzufügen, ändern oder anzeigen. Falls das Konto nicht aktiviert ist (Status: Nicht aktiviert), haben Sie die Möglichkeit, eine **E-Mail-Adresse hinzuzufügen**, wodurch eine Aktivierungsanfrage zum Erstellen eines persönlichen Glooko-Kontos per E-Mail an den Patienten gesendet wird. Falls eine Aktivierungsanfrage an den Patienten gesendet wurde (Status: Eingeladen), haben Sie folgende Möglichkeiten: **Einladung erneut senden** oder **E-Mail-Adresse ändern**, was eine weitere Anfrage auslöst. Sobald das Konto von einem Patienten aktiviert wurde (Status: Aktiviert), können Sie die E-Mail-Adresse nicht mehr ändern.

### Konto

<b>Status</b> Eingeladen (13.07.2019) <a href="#">Einladung erneut senden</a>	<b>E-Mail</b> lucytest1@sample.com <a href="#">E-Mail-Adresse ändern</a>
---	--

## Dateneinstellungen

Unter Patienteneinstellungen > Dateneinstellungen können Sie die Maßeinheiten, den händisch eingegebenen BZ-Wert aus Insulinpumpe, BZ-Zielbereiche, Flaggeneinstellungen und tägliche Zeitbereiche anpassen. Klicken Sie auf **Speichern**, um Ihre Änderungen zu speichern.

Anzeige der folgenden Einstellungen:

- **Maßeinheit:** Dies kann auf **mg/dl** oder **mmol/l** geändert werden.
- **Einstellungen für händisch eingegebenen BZ-Wert aus der Insulinpumpe:** Dies kann auf **Ja** oder **Nein** eingestellt werden, um händisch eingetragene BZ-Messwerte aus Insulinpumpen in den Patientendiagrammen und -statistiken einzubeziehen oder auszulassen. Standardmäßig werden diese Werte einbezogen.

**HINWEIS:** Sie können den

händisch eingegebenen BZ-Wert aus der Insulinpumpe für alle Patienten auf Populationsebene ebenfalls unter Klinikeinstellungen > [Dateneinstellungen](#) ändern. Die Einstellungen auf Patientenebene haben stets Vorrang vor Einstellungen auf Populationsebene.

- **BZ-Zielbereiche:** Hier können Sie die BZ-Zielbereiche eines einzelnen Patienten ändern, darunter den unteren Grenzwert, den oberen Grenzwert vor dem Essen und den oberen Grenzwert nach dem Essen. Zum Ändern dieser Bereiche klicken Sie auf das Feld mit dem Wert, der angepasst werden soll, und geben Sie den gewünschten Wert ein.

Dateneinstellungen

Meter Units  mg/dL  mmol/L

BZ-Eintrag durch Pumpe [Standard wiederherstellen](#)

In die Statistik einfügen  Ja  Nein

BZ-Sollbereiche [Standard wiederherstellen](#)

Unterer Grenzwert 3.9 mmol/L Vor dem Essen Oberer Grenzwert 7.2 mmol/L Nach dem Essen Oberer Grenzwert 10 mmol/L

Populationsflaggen-Einstellungen [Populationseinstellungen wiederherstellen](#)

35 % der Messwerte sind über 13.9 mmol/L

10 % der Messwerte sind unter 3.9 mmol/L

Ein hoher Wert liegt über 22.2 mmol/L

Ein niedriger Wert liegt unter 2.8 mmol/L

Tägliche Zeitrahmen\* [Standard wiederherstellen](#)

05:00 MORGEN 10:00 NACHMITTAG 15:00 ABEND 21:00 NACHT MORGEN

\*Ereignisse, die vor dem Morgen auftreten, erscheinen in der vorherigen Nacht. Um die Ereignisse strikt den Kalendertagen zuzuordnen, legen Sie fest, dass „Morgen“ um Mitternacht beginnt.

**Speichern**


- **Populationsflaggen-Einstellungen:** Das Anpassen dieser Einstellungen betrifft nur den ausgewählten Patienten. Zum Ändern dieser Einstellungen klicken Sie auf das Feld mit dem Wert, der angepasst werden soll, und geben Sie den gewünschten Prozentsatz oder Wert ein.

**HINWEIS:** Sie können die Flaggenparameter für alle Patienten auf Populationsebene ebenfalls unter Klinikeinstellungen > [Dateneinstellungen](#) ändern. Die Einstellungen auf Patientenebene haben stets Vorrang vor Einstellungen auf Populationsebene.

- **Tägliche Zeitbereiche:** Hier können Sie die Tageszeiten einstellen, die den Start der Morgen-, Nachmittags-, Abend- und Nachtroutinen eines Patienten festlegen. Zum Aktualisieren der Bereiche eines Patienten klicken Sie auf den **Pfeil nach unten (▼)** neben einer Tageszeit und wählen Sie eine neue Startzeit.

## Geräte

Unter Patienteneinstellungen > Geräte haben Sie die Möglichkeit, Daten aus dem Omnipod®-System eines Patienten hochzuladen oder das/die iGlucose-Gerät(e) eines Patienten mit Glooko zu verbinden.

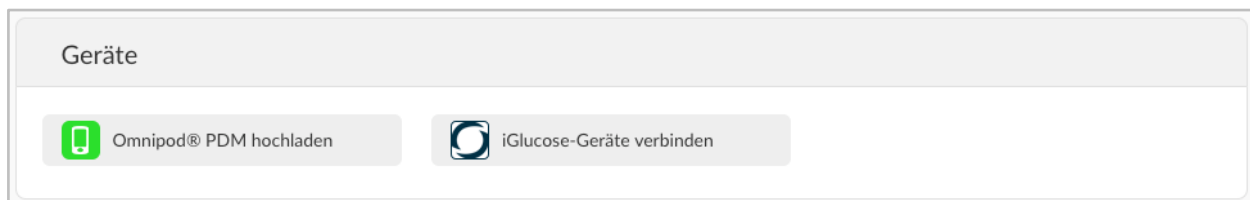

## Omnipod® PDM hochladen

Zum Hochladen von einem OmniPod-System:

1. Klicken Sie unter Patienteneinstellungen > Geräte auf **Omnipod® PDM hochladen**.
2. Wenn Sie gefragt werden, ob Sie fortfahren möchten, klicken Sie auf **Weiter**.
3. Wählen Sie **Omnipod® PDM-System** oder **Omnipod DASH™-System** und klicken Sie dann auf **Weiter**.

**HINWEIS:** Falls Sie ein Omnipod DASH™-System auf einem Mac-Computer synchronisieren möchten, werden Sie aufgefordert, den [Glooko Uploader](#) zu installieren, um Patientendaten zu synchronisieren, falls dies Teil Ihres Abonnement-Modells ist. Falls

Ihr Abonnement-Modell den Glooko Uploader nicht umfasst, werden Sie aufgefordert, einen Windows-Computer zu verwenden, oder wenden Sie sich an [support@glooko.com](mailto:support@glooko.com).

4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zum Verbinden des Geräts und Hochladen der Daten.

**HINWEIS:** Falls Sie bereits ein Omnipod-Gerät synchronisiert haben, gibt es auch die Möglichkeit, Omnipod-Daten hochzuladen, indem Sie die Option **Omnipod® PDM hochladen** in der oberen rechten Ecke der meisten Bildschirme eines Patientenkontos auswählen.

## iGlucose-Geräte verbinden

Sie können ein iGlucose-Messgerät des Patienten mit Glooko verbinden, um seine Daten in Echtzeit mit iGlucose zu synchronisieren.

**HINWEIS:** Bevor ein iGlucose-Messgerät an Glooko angeschlossen wird, muss der Patient mindestens einen Messwert auf seinem Messgerät haben.


Um das iGlucose-Messgerät zu verbinden:

1. Klicken Sie unter Patienteneinstellungen > Geräte auf **Mit CareLink verbinden**.
2. Geben Sie die Seriennummer des iGlucosemessgerätes des Patienten und die letzte Messung (Wert) ein und klicken Sie dann auf **Weiter**.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zum Verbinden der Geräte mit Glooko.

## Kontoverwaltung

Um ein Patientenkonto zu archivieren, gehen Sie auf Patienteneinstellungen > Kontoverwaltung und aktivieren Sie die Option **Patientenkonto archivieren**.

Nach der Aktivierung eines Patientenkontos wird der betreffende Patient nicht mehr in Ihrer Patientenliste angezeigt. Er wird jedoch weiterhin in den Suchergebnissen angezeigt.

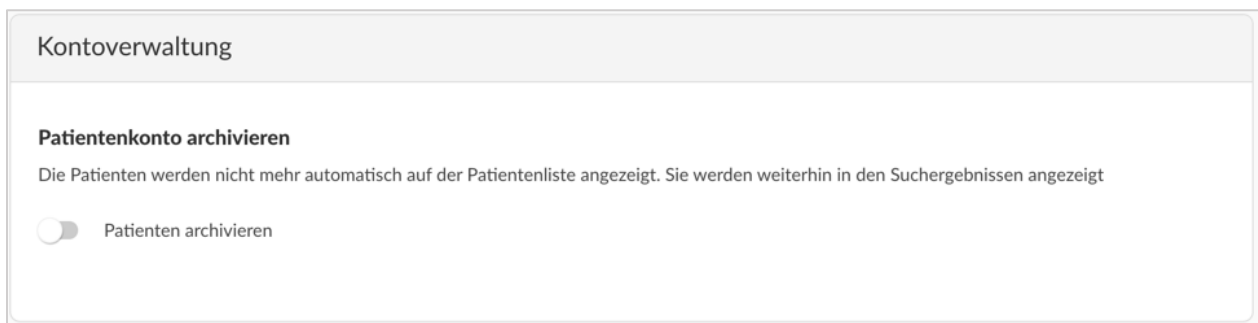

**Kontoverwaltung**

**Patientenkonto archivieren**

Die Patienten werden nicht mehr automatisch auf der Patientenliste angezeigt. Sie werden weiterhin in den Suchergebnissen angezeigt

Patienten archivieren

**HINWEIS:** Nur Administratoren haben Zugriff auf die Archivierung von Patientenkonten.

## 3. Berichtsübersicht

Die Diabetesdaten des Patienten werden in PDF-Berichten gesammelt, die einfach gedruckt, geteilt oder gespeichert werden können. Sie können alle verfügbaren Daten einbeziehen oder nur die Daten auswählen, die Sie abbilden möchten.

Lesen Sie für detaillierte Informationen zu den verfügbaren Berichten und der Auswertung der Daten die [Glooko Referenzanleitung für Berichte](#).

### 3.1. Verfügbare Berichte

Die verfügbaren Berichte umfassen:

- Zusammenfassung
- Protokoll
- Überblick
- Täglicher Überblick
- Tagesanalyse
- Kalender
- Geräte
- Einblicke

### 3.2. Berichte erstellen

Befolgen Sie diese Schritte, um einen PDF-Bericht zu erstellen:

1. Rechtsklicken Sie in der Patientenliste auf einen Patientennamen und wählen Sie **Bericht drucken** (oder klicken Sie auf **PDF-Bericht erstellen** in der rechten oberen Ecke auf den meisten Bildschirmen in einem Patientenkonto).
2. Wählen Sie einen Datumsbereich, welche Berichte einbezogen werden sollen und den gewünschten Druckmodus.

**HINWEIS:** Um eine Berichtsauswahl als neues Bevorzugtes Profil zu speichern, setzen Sie ein **Häkchen (✓)** im Feld **Auswahl als bevorzugtes Profil speichern**, geben Sie einen Namen für das Profil ein und klicken Sie auf **OK**. Sie haben auch die Möglichkeit, ein bevorzugtes Profil aus dem Drop-Down-Menü „Bevorzugte PDF-Einstellungen“ rechts oben im Fenster auszuwählen. Um bevorzugte Profile anzuzeigen, zu ändern oder



hinzuzufügen, klicken Sie auf **Bevorzugte Profile verwalten** oder gehen Sie zu Klinikeinstellungen > [Bevorzugte PDF-Einstellungen](#).

3. Sobald die Berichtskriterien definiert sind und Sie fortfahren möchten, klicken Sie auf **PDF erstellen**.

### PDF-Bericht erstellen X Schließen

Lucy Test Bevorzugte PDF-Einstellung  
Geburtsdatum: 01.01.70 Diabetes: Typ 2 Kein Profil ausgewählt

[Favoriten verwalten](#)

Zeitraum: 2 Wochen 24.04.2019 - 07.05.2019

<b>Zusammenfassung</b>  2 Seiten	<b>Protokoll</b>  2 Seiten	<b>Übersicht</b>  1 Seite	<b>Täglicher Überblick</b> 
<b>Tagesanalyse</b>  1 Seite	<b>Kalender</b> 	<b>Einblicke</b> 	<b>Geräte</b> 

Geschätzte Berichtlänge: 6

Druckmodus:  Schwarzweiß  Farbe

Kommentar hier eingeben! Kommentare werden in der Zusammenfassung des Berichts angezeigt.

Auswahl als bevorzugtes Profil speichern **PDF-Bericht erstellen**

## 4. Support

Falls Sie noch Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne. Sie erreichen unseren Kundendienst von Montag bis Freitag, 8 Uhr bis 20 Uhr (UTC-05:00). Hier können Sie uns kontaktieren:

- Web-Support: <https://support.glooko.com>
- E-Mail-Support: [help@glooko.com](mailto:help@glooko.com)
- Telefonischer Support: 0800 0800 033



Glooko Inc.  
411 High Street  
Palo Alto, CA 94041  
USA



Glooko AB  
Nellickevägen 20  
SE-412 63 Göteborg  
Schweden

# Anhang 1: Zusätzliche Funktionen

Die folgenden Funktionen sind als zusätzliche Optionen zu Ihrem Abonnement des Population Trackers erhältlich. Für weitere Informationen dazu, wie Sie diese Funktionen zu Ihrem Population Tracker hinzufügen, wenden Sie sich direkt an Ihren Kundenbetreuer von Glooko oder per E-Mail an [sales@glooko.com](mailto:sales@glooko.com).

## A.1. Fallmanagement

Die Fallmanagement-Funktion bietet zusätzliche Patienteninteraktionen und Trackingoptionen, darunter die Möglichkeit, Details zum Patientenstatus hinzuzufügen.

Wenn die Fallmanagement-Funktion aktiviert ist, können den Patientenkonten Kontaktflaggen und Status hinzugefügt werden, die in der Patientenliste in Ihrem Population Tracker angezeigt werden.

### Kontaktflaggen

Kontaktflaggen werden in einem Patientenkonto basierend auf voreingestellten Flaggenkriterien angezeigt, z. B. wenn Werte, durchschnittlicher BZ oder durchschnittlicher CGM-Wert nicht im Zielbereich liegen oder ein Patient in den letzten 30+ Tagen keine Synchronisation von zu Hause durchgeführt hat. Fahren Sie über eine Flagge, um die Gründe anzuzeigen, durch die die Flagge ausgelöst wurde. Diese Parameter können auf Populationsebene unter [Klinikeinstellungen](#) oder auf Patientenebene unter [Patienteneinstellungen](#) verwaltet werden. Die Einstellungen auf Patientenebene haben stets Vorrang vor Einstellungen auf Populationsebene.

### Status

Patientenstatus werden verwendet, um Informationen über wichtige Folgemaßnahmen (wie bevorstehende Termine oder Erinnerungen zur Überprüfung von Daten) im Zusammenhang mit einem Patienten zu liefern. Diese Status sind anpassbar und können auf Populationsebene verwaltet werden unter [Klinikeinstellungen](#).

## A.2. Mobile Insulin Dosing System (MIDS)\*

Durch die Anwendung des Mobile Insulin Dosing Systems (MIDS) von Glooko können Ärzte eine Insulinverschreibung für Personen mit Typ-2-Diabetes konfigurieren, die mit Langzeitinsulin beginnen oder Anpassungen ihres Langzeitinsulins benötigen. Nach der Konfiguration wird die Glooko Mobile App automatisch Insulinanpassungen anzeigen, empfehlen und den Patienten daran erinnern, basierend auf den Nüchtern glukosewerten und dem Behandlungsplan, der vom Arzt erstellt wurde.

**MIDS ist nur für Patienten verfügbar, die das Programm von ihrem Diabetesteam verschrieben bekommen haben. MIDS ist verschreibungspflichtig. MIDS wurde für Glukosemesswerte in mg/dl konzipiert und kann nicht sicher mit Werten in mmol/l verwendet werden. Um körperliche Schäden zu vermeiden, stellen Sie bitte sicher, dass alle mit dem Glooko-System verwendeten Glukosemessgeräte auf Glukosewerte in mg/dl eingestellt sind.**

Wenn die MIDS-Funktion aktiviert ist, erscheint in jedem Patientenkonto eine neue MIDS-Registerkarte, und der MIDS-Status erscheint in der Patientenliste in Ihrem Population Tracker.

Mehr über MIDS erfahren Sie in [Glooko-MIDS – Bedienungsanleitung für Kliniken](#).

*\* Zurzeit nur in den USA erhältlich.*

## A.3. DreaMed Advisor\*

Durch eine Integration mit DreaMed werden Glooko-Daten über DreaMed Advisor Pro verarbeitet, ein geschützter Algorithmus, der die Glukose- und Insulinabgabedaten einer Person analysiert. Basierend auf diesen Informationen kann DreaMed Advisor Pro ein aktualisiertes Insulinbehandlungsprofil empfehlen, einschließlich neuer Basalraten, Kohlenhydrat-Insulin-Verhältnis und Insulinsensibilitätsfaktoren. DreaMed Advisor Pro kann außerdem Empfehlungen für Verhaltensänderungen geben, wie zum Beispiel Zeiten für Essensboli und Bolusabgabe-Compliance.


Wenn die DreaMed-Advisor-Funktion aktiviert ist, erscheint in jedem Patientenkonto eine neue Advisor-Registerkarte, und die Empfehlungen von Advisor erscheinen in der Patientenliste in Ihrem Population Tracker.

*\* Zurzeit nur in den USA erhältlich.*

## A.4. Neuer Population Tracker


Neuer Population Tracker bietet zusätzliche Filter- und Tracking-Optionen, einschließlich der Möglichkeit, benutzerdefinierte Tags zu erstellen und Patienten von der Patientenliste einzuladen. In der neuen Patientenliste sind drei Spalten verfügbar: **Name**, **Letzte Synchronisierung** und **Tags**.

Wenn Neuer Population Tracker für Ihre Klinik aktiviert ist, haben Sie die Möglichkeit, über Ihr Population Tracker Dashboard zwischen der älteren Version und der neuen Patientenliste zu wechseln.

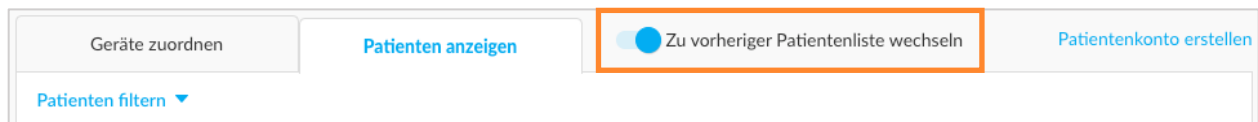

### Benutzerdefinierte Tags

Klicken Sie in der Patientenliste auf das **Plus-Symbol (+)**, um ein benutzerdefiniertes Tag zu erstellen, ein bestehendes benutzerdefiniertes Tag hinzuzufügen oder ein Tag von einem Diensteanbieter hinzuzufügen. Wenn ein Tag von einem Diensteanbieter ausgewählt wird, können Sie mit der Maus über das Tag fahren, um den Vor- und Nachnamen des Anbieters anzuzeigen.

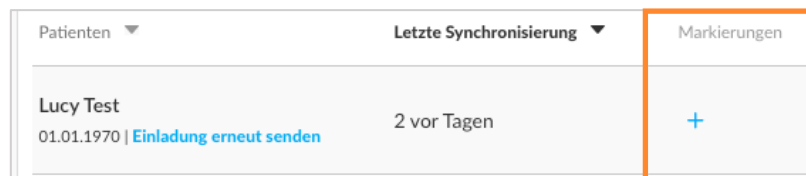

### Von der Patientenliste einladen

Diensteanbieter haben die Möglichkeit, E-Mails an Patienten zu ändern und Patienten von der Patientenliste zu Glooko einzuladen oder erneut einzuladen.

Wenn ein Konto noch nicht aktiviert ist, steht Ihnen die Option **Einladen** zur Verfügung. Dadurch wird eine Aktivierungsanfrage per E-Mail an den Patienten gesendet, damit dieser sich ein persönliches Glooko-Konto einrichten kann. Wenn eine Aktivierungsanfrage an den Patienten gesendet wurde, können Sie die **Einladung erneut senden** und/oder die vorhandene E-Mail-

Adresse bearbeiten, was dazu führt, dass eine weitere Anfrage gesendet wird. Sobald das Konto von einem Patienten aktiviert wurde, können Sie die E-Mail-Adresse nicht mehr ändern.

Patienten ▾	Letzte Synchronisierung ▾	Markierungen
Lucy Test 01.01.1970	2 vor Tagen	+

## A.5. Mellitus Health\*

Insulin Insights™ von Mellitus Health ist ein von der FDA genehmigtes automatisiertes Insulin-Titrationsprogramm, das auf der Grundlage der früheren Blutzuckermesswerte eines Patienten und des aktuellen Insulinschemas präzise Empfehlungen zur Insulindosierung abgibt. Durch unsere Zusammenarbeit mit Mellitus Health haben Sie die Möglichkeit, Ihren Patienten direkt aus Ihrem Population Tracker heraus digitale Therapeutika zu verschreiben.

Wenn die Mellitus Health-Funktion aktiviert ist, haben Sie Zugriff auf die Plattform von Mellitus Health über eine neue App-Registerkarte, die auf jedem Patientenkonto angezeigt wird. Nachdem Sie Ihre Patienten für das Programm angemeldet haben, werden deren Blutzuckerwerte und Insulinschemata an Mellitus Health übermittelt, und es werden automatisch Dosierungsempfehlungen generiert.


**HINWEIS:** Wenn Sie die Mellitus-Health-App aktivieren, erhält Ihre Klinik Kontozugangsdaten, um sich auf der Mellitus-Health-Plattform anzumelden.

\* *Zurzeit nur in den USA erhältlich.*

## A.6. Wichtige Statistiken kopieren\*

Mit der Funktion Wichtige Statistiken kopieren können Sie gegebenenfalls wichtige Patienteninformationen (wie demografische Daten des Patienten, Geräteangaben, Pumpeneinstellungen und Blutzuckerwerte) aus Patientenkonten im Nur-Text-Format kopieren.

Wenn die Funktion Wichtige Statistiken kopieren aktiviert ist, können Sie auf die Schaltfläche **Wichtige Statistiken kopieren** klicken, die oben rechts auf den Bildschirmen Zusammenfassung und Geräte der Patientenkonten angezeigt wird, um die auf diesen Bildschirmen gefundenen Informationen in die Zwischenablage zu kopieren.

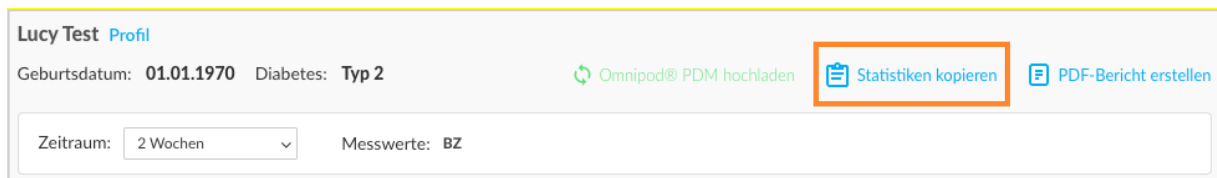

**HINWEIS:** Da diese Funktion geschützte Gesundheitsinformationen in Ihre Zwischenablage kopiert, empfiehlt Glooko, die Vorschriften Ihrer Organisation für den Umgang mit diesen Informationen zu befolgen.

\* *Zurzeit nur in den USA erhältlich.*

## A.7. Glooko Clinical Research


Mit der Funktion „Glooko Clinical Research“ kann Ihre Klinik Forschungsteilnehmer in Ihrem Population Tracker beobachten.

**HINWEIS:** Um die Konten von Forschungsteilnehmern von denen Ihrer bestehenden Patienten getrennt zu halten, wird Ihrer Klinik ein neuer ProConnect-Code speziell für die Forschung zugewiesen und die Benutzer an Ihrer Klinik müssen separate Konten benutzen, um auf die Plattform zuzugreifen. Damit Forschungsteilnehmer ihre Daten weitergeben können, müssen sie eine der beiden nachstehenden Methoden verwenden:

1. Die Daten mittels der [Glooko Research Uploader](#)-Software auf die Glooko Clinical Research-Plattform hochladen.
2. Die Glooko Clinical Research Mobile App herunterladen und mit ihrem Clinical Research ProConnect-Code verknüpfen.


### Teilnehmer-ID

Wenn die Funktion „Glooko Clinical Research“ aktiviert ist, können Sie während des Verfahrens zur [Erstellung eines Patientenkontos](#) eine **Teilnehmer-ID** eingeben. Mithilfe der Teilnehmer-ID können Sie Ihre Forschungsteilnehmer verfolgen. Sie können auch im Population Tracker nach Teilnehmer-ID suchen.

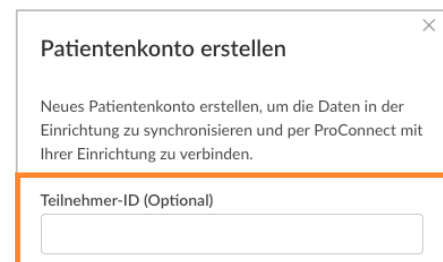

### Patienten entfernen

In den [Patienteneinstellungen](#) haben Sie in dem neuen Kontoabschnitt die Möglichkeit, einen **Patienten zu entfernen**. Dadurch wird der Forschungsteilnehmer aus der klinischen Forschungsstudie herausgenommen und das Konto wird deaktiviert.

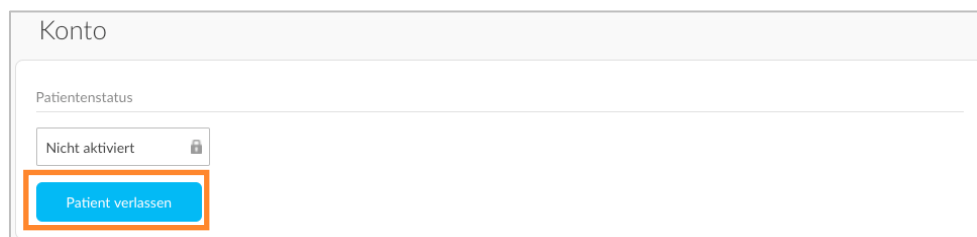



## Research Uploader

Bei der Verwendung von Glooko Clinical Research hat Ihre Klinik Zugriff auf einen separaten Research Uploader. Dieser dient speziell zum Hochladen von Teilnehmergerätedaten zur Glooko Clinical Research Plattform.

## A.8. Zwei-Faktor-Authentifizierung

Mit der Zwei-Faktor-Authentifizierungs-Funktion kann Ihre Klinik von professionellen Benutzern, die auf Ihren Population Tracker zugreifen, zwei Arten von Authentifizierung verlangen. Dies fügt eine zusätzliche Sicherheitsstufe für Ihre Klinik und Ihre Patienteninformationen hinzu.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, haben Ihre professionellen Benutzer die Wahl, die Zwei-Faktor-Authentifizierungs-Option in **Klinikeinstellungen** > [Konto](#) auf Ein oder Aus einzustellen.

Wenn der Benutzer sie auf Ein einstellt, bekommt er per E-Mail ein Einmal-Passwort (OTP), das bei der Anmeldung beim Population Tracker eingegeben werden muss. Der Benutzer kann dieses OTP 30 Tage lang speichern; andernfalls ist bei jedem Zugriff auf das Konto ein neues OTP nötig.

### Konto

E-Mail-Adresse drqa@example.com <a href="#">E-Mail-Adresse ändern</a>	Kennwort ***** <a href="#">Kennwort ändern</a>	Sprache Deutsch <a href="#">Sprache wechseln</a>
2-Schritt-Verifizierung Deaktiviert <input type="checkbox"/>		

**HINWEIS:** Administratoren sind auch in der Lage, diese Einstellung für alle professionellen Benutzer in Ihrer Klinik zu verwalten.

## A.9. Single Sign-On

Die Funktion Single Sign-On (SSO) ermöglicht es Ihren professionellen Benutzern, sich bei ihren Population Tracker-Konten über einen sicheren Authentifizierungsdienst, der den Zugriff auf mehrere Anwendungen verwaltet, anzumelden.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Benutzer auf dem Glooko-Anmeldebildschirm Anmelden mit SSO wählen, ihre Glooko-Konto-Anmeldedaten eingeben und den Bildschirmanweisungen zur Verbindung ihrer Konten folgen.

## A.10. Betreuungsprogramme

Mit den Glooko Betreuungsprogrammen kann Ihre Klinik ihre Patientenpopulation effektiver verwalten, indem sie Programme zuweist, die auf spezifische Diabetesbedürfnisse zugeschnitten sind. Diese Programme bieten Ihnen und Ihren Patienten hilfreiche Ressourcen zum Verständnis ihrer einzigartigen Diabetesarten und Anleitung zur Verwendung von Glooko zur Verbesserung des Diabetesmanagements.

**glooko**  
Vereinfacht den Umgang mit Diabetes

**Anmelden**

E-Mail (Benutzername)

Kennwort

Mindestens 8 Zeichen, 1 Zahl und 1 Sonderzeichen (!@#)

[Kennwort vergessen](#)

[Sie haben keine Anweisungen zum Entsperren erhalten?](#)

[Anmelden](#)

[Anmelden mit SSO](#)

[Sie haben kein Konto? Anmelden für Glooko hier](#)

Wenn Betreuungsprogramme für Ihre Klinik aktiviert sind, haben Sie die Möglichkeit, den Patienten über Ihren Population Tracker Programme zuzuweisen. Sobald ein Programm einem

Patienten zugewiesen wurde, erhält dieser eine E-Mail mit Anweisungen für den Online-Zugriff auf das Programm.

**HINWEIS:** Ihre Klinik muss den [Neuen Population Tracker](#) verwenden, um diese Funktion nutzen zu können.


# Anhang 2: Gerätespezifische Funktionen

## B.1. Kontroll-IQ

Patienten, die eine Tandem t:slim X2-Pumpe zusammen mit einem CGM-System verwenden, können ein Tool namens «Control-IQ» aktivieren. Dabei handelt es sich um eine hochentwickelte hybride Closed-Loop-Technologie, die sowohl Hochs also auch Tiefs vorhersagt und hilft, diese zu vermeiden. Control-IQ ermöglicht es dem Patienten, den Insulinspiegel auf Grundlage der CGM-Werte automatisch durch die Pumpe anpassen zu lassen.

Ein Patient mit auf der Pumpe installiertem Control-IQ kann auf 4 verschiedenen Modi auswählen:

- Kontroll-IQ
- Schlaf
- Aktivität
- Manuell

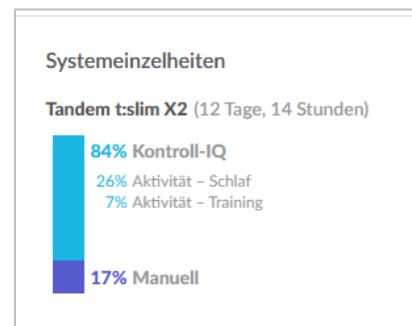

Wenn es für den Patienten in Glooko Control-IQ-Daten gibt, wird diese Funktion auf der Seite «Zusammenfassung» in Form einer Informationskarte mit der Bezeichnung **Systemeinzelheiten** aufgeführt. Control-IQ wird auch in der Tagesanzeige des Abschnittes **Diagramme** angegeben.